


ACTIVESHOP[®]


INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

ELEGANTE 882 SCRUB PENTRU PIELE
+ DARSONVAL

Model 862 HF/M-882

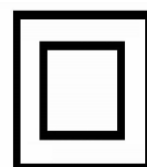

Date tehnice:

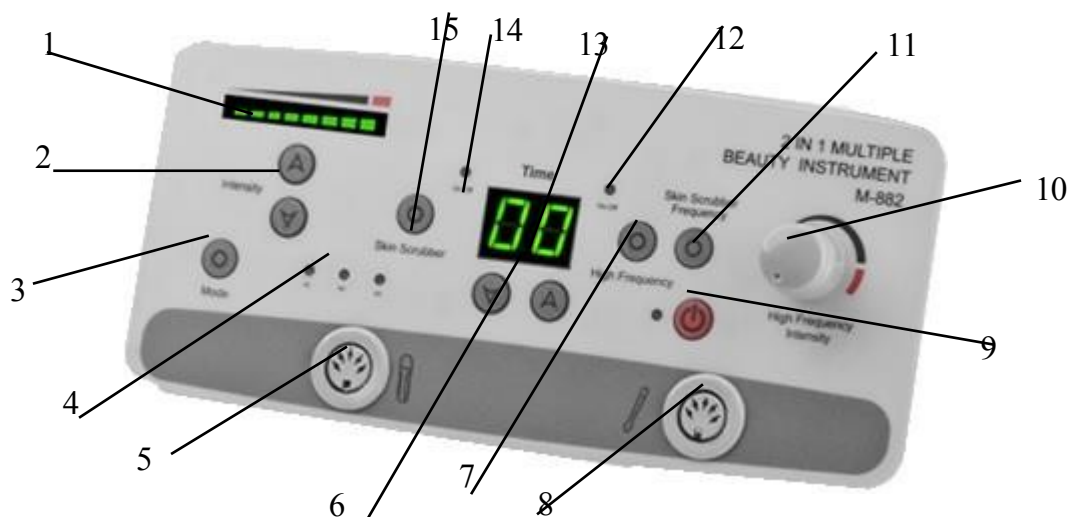

1. Indicator de intensitate
2. Reglarea intensității
3. Selectarea opțiunii de tratament pentru peeling prin cavitate (M1- peeling prin cavitate, M2- sonoforeză, M3- sonoforeză cu micromasaj).
4. Lumină de funcționare pentru opțiunea de tratament peeling prin cavitate corespunzătoare,
5. Conectarea peelingului prin cavitate,
6. Ajustarea timpului de operare,
7. Selectarea opțiunii de tratament - darsonval,
8. Conectarea darsonvalului,
9. Pornirea/oprirea peelingului cu darsonval/cavitație,
10. Reglarea intensității Darsonval,
11. Reglarea puterii spatulei de peeling prin cavitate
12. Lumină pentru funcționarea Darsonval
13. Afișarea timpului
14. Lumină pentru peeling prin cavitate,
15. Selectarea opțiunii de tratament - peeling prin cavitate

DARSONWAL

Curenții D'Arsonval sunt o variantă a curenților de înaltă frecvență. Dispozitivul produce ozon prin intermediul descărcărilor electrostatice care au loc în peleți.

Acțiunea curenților d'Arsonval se bazează în principal pe efectul asupra vaselor de sânge și a terminațiilor nervoase vegetative. Scânteia care se produce între electrod și piele provoacă vasodilatarea vaselor de sânge și afectează țesutul subcutanat. Ozonul produs are un efect dezinfectant. Există o gamă de 3 granule în aparat. Tratamentul se efectuează timp de 5 până la 7 minute.

INDICAȚII:

- Tulburări senzoriale ale pielii,
- alopecie areata,
- Stimularea sistemului circulator,
- Dezinfecția pielii,

CONTRAINDICAȚII:

- Sarcină
- Hipertensiune arterială
- Edem
- Hiperactivitate nervoasă
- Boli cardiace
- Afecțiuni inflamatorii ale pielii
- Febra
- astm

- Epilepsie
- Implanturi metalice
- Rozaceea
- Vase de sânge dilatate
- Afecțiuni alergice ale pielii

Instrucțiuni de utilizare

1. Conectați mânerul de la darsonwala la intrarea #8.
2. Setează timpul de tratament cu ajutorul butonului 6.
3. Apăsăți butonul 7, lampa de pregătire darsonwala (12) se aprinde.
4. Setează intensitatea tratamentului cu ajutorul butonului (10).
5. Apăsăți butonul 9 pentru a începe tratamentul.

Peelingul prin cavitație este în primul rând o curățare nedureroasă a pielii cu ajutorul vibrațiilor cu ultrasunete. Acesta permite îndepărtarea completă a excesului de sebum din pori și foliculii de păr, precum și eliminarea punctelor negre.

Odată cu utilizarea peelingului, are loc fenomenul de cavitare, care apare atunci când ultrasunetele intră în contact cu un lichid, apoi se formează bule de gaz microscopice și o serie de procese chimice care duc la descompunerea celulelor moarte ale stratului cornos.

INDICAȚII

- Ridicarea ovalului facial și a bărbiei,
- Fermitatea structurii pielii,
- Netezirea ridurilor superficiale,
- Reducerea "pungilor" de sub ochi și a "picioarelor de cioară",
- reconstrucția colagenului,
- Terapia anti-îmbătrânire - prevenire,
- Reducerea impurităților, a porilor dilatați,
- Fermitatea structurii pielii.
- Purificarea pielii.

Instrucțiuni de utilizare

1. Conectați spatula de peeling prin cavitare la intrarea 5,
2. Selectați timpul de tratament cu ajutorul butonului 6,
3. Selectați tipul de tratament cu ajutorul butonului 3,
4. Selectați intensitatea tratamentului cu butonul 2 (indicatorul de intensitate va apărea pe afișajul 1.),
5. Apăsăți butonul 15, lampa de pregătire pentru peeling prin cavitare (14) se aprinde,
6. Apăsăți butonul 9 pentru a începe tratamentul.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. Dispozitivul este un echipament profesional destinat utilizării în chirurgia cosmetică. Operarea aparatului numai de către personal cosmetic calificat evită efectele nedorite în timpul tratamentului.
2. Aparatul nu trebuie dezamblat și nu trebuie încercat să fie utilizat în alte scopuri decât cele indicate în aceste instrucțiuni de utilizare. Toate întreținerea și reparațiile trebuie efectuate numai de către un tehnician de service autorizat (societatea ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Nu instalați și nu folosiți aparatul în apropierea lichidelor, în locuri umede sau cu mâinile ude - astfel încât să nu pătrundă lichide în aparat.
4. Deconectați imediat aparatul de la priză și contactați service-ul autorizat oferit de ACTIVESHOP Ltd. în următoarele cazuri
(a) a intrat lichid în aparat, b) aparatul emite un miros ciudat, fum sau scoate sunete ciudate, c) cablul de alimentare a fost deteriorat, d) aparatul a fost răsturnat sau carcasa sa a fost deteriorată.
5. Nu așezați niciun obiect pe cabluri. Nu instalați aparatul într-un loc în care cineva poate călca pe cablul de alimentare.
6. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză de fiecare dată când terminați de lucrat cu aparatul.
7. Nu introduceți nimic în orificiul aparatului. Dacă un obiect străin intră în deschidere, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.
8. Nu așezați aparatul pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Aparatul poate fi deteriorat dacă cade.
9. Pentru a garanta durata de viață fixă a aparatului, se recomandă respectarea unui interval de un minut înainte de a apăsa din nou butonul de alimentare (între pornire și oprire și viceversa).
10. Alimentarea cu energie electrică trebuie să respecte specificațiile de pe placa de caracteristici. În caz contrar, există riscul ca aparatul să funcționeze defectuos, să fie deteriorat sau chiar ars.

ATENȚIE:

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau altor disfuncționalități, contactați un centru de service autorizat pentru a evita orice pericol.
2. Acest aparat poate fi utilizat de copii în vârstă de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice și mentale diminuate și cu lipsă de experiență și familiaritate cu echipamentul, în cazul în care se asigură supravegherea sau instruirea privind utilizarea echipamentului în condiții de siguranță, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese.
3. Echipamentul nu este destinat copiilor pentru a se juca cu el. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când în apropiere se află copii sau persoane care nu cunosc suficient utilizarea aparatului.
5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu aparatul electric poate reprezenta un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, prin urmare aparatul trebuie utilizat și depozitat departe de îndemâna copiilor.



ELIMINAREA APARATULUI

Eliminați aparatele electrice uzate, accesoriile și ambalajele la centrele de reciclare, în conformitate cu principiile de protecție a mediului. Aparatele electrice nu trebuie aruncate în containerele pentru deșeuri menajere. Respectați regulile de eliminare a acestui tip de echipament. Pentru a proteja mediul în conformitate cu Directiva 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, echipamentele electrice uzate trebuie colectate separat și apoi predate la punctele de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

Aparatele scoase din uz și cele vechi conțin componente complet reciclabile și, prin urmare, ar trebui predate pentru reciclare. Prin urmare, acestea trebuie predate la punctele de colectare corespunzătoare, precum și la ACTIVESHOP Ltd.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Aparatul trebuie transportat la o temperatură cuprinsă între (-) 20 °C și (+) 50 °C numai în ambalajul său original. Depozitați aparatul într-o zonă bine ventilată, cu o umiditate relativă de cel mult 75%. Temperatura de funcționare de la (+) 10 °C la (+) 40 °C. În timpul proceselor de depozitare și transport, dispozitivul nu trebuie să fie aruncat sau scăpat, expus la șocuri mecanice sau agenți atmosferici.