

Aparat inteligent de masaj respirator cu cupe (recipient combinat)

Instrucțiuni de utilizare



Înainte de utilizare, citiți cu atenție instrucțiunile. Acest produs nu poate înlocui dispozitivele medicale sau medicamentele.

Prezentarea produsului

Acest produs integrează într-un singur dispozitiv funcții inteligente de ventuze respiratorii, comprimă caldă cu lumină roșie, eliberare a presiunii cu un singur clic și menținerea ventuzelor. Datorită monitorizării inteligente a presiunii în interiorul recipientului, presiunea de vid este ajustată în timp real pentru a obține ventuze respiratorii dinamice.



Model cu suport pentru iradiere cu lumină roșie și albastră (DS-A56 / SXT-10345-05)



Model clasic îmbunătățit cu rezervor (DS-A55)

Parametrii produsului

Produs	Actualizare clasică cu rezervor de rezervă	Recipient pentru dispozitive subalatorilor expose la radiații de lumină roșie și albastră
Model	DS-A55	DS-A56 (SXT-10345-05)
Produs	145 mm*100 mm*45 mm	145 mm*100 mm*45 mm
Tensiune nominală	3,7	3,7
Putere nominală	2,6	2,6
Intensitate de extracție	-60-0 kPa	-60-0kpa
Standarde de performanță	GB4706.1-2005	GB4706.10-2008

Instrucțiuni de utilizare

Pregătirea înainte de utilizare

- Citiți cu atenție măsurile de siguranță înainte de a utiliza acest produs. Persoanele care nu îndeplinesc condițiile de utilizare nu au voie să utilizeze acest produs.
- Pentru curățarea și hidratarea pielii, vă recomandăm să utilizați un prosop umed sau un spray pentru a îmbunătăți confortul utilizatorului.
- Strângeți și instalați corpul transparent al rezervorului (înainte și după utilizarea dispozitivului, setați-l în Ștergeți cu o cârpă umedă etc.).
- Verificați dacă dispozitivul este complet și nu prezintă deteriorări



Panou de control

Buton de pornire/mod

- Apăsați și țineți apăsat butonul timp de 1,5 secunde pentru a porni dispozitivul și pe ecranul LCD va apărea un cronometru de 20 de minute. Lumină roșie din partea de jos se va aprinde, iar indicatorul bateriei se va aprinde și el (acest dispozitiv are un cronometru de 20 de minute și se va opri automat după 20 de minute).
- Apăsați și mențineți apăsat timp de 1,5 secunde pentru a opri ecranul LCD și lumina roșie din partea inferioară.
- Când este pornit, apăsați scurt pentru a comuta între moduri. Acest dispozitiv are două moduri. Modul de vid profund (afișajul indică -) și modul de respirație liniștitoare (afișajul indică -).
- Modul de vid profund implicit este activat, iar modul de vid și lumina roșie se aprind automat.

Butonul de intensitate a aspirației

- Când este pornit, setarea implicită este nivelul 3.
- Apăsați scurt pentru a seta intensitatea aspirației și funcționarea în modul ciclic 0-12-0.
- Fiecare apăsare scurtă adaugă un nivel mai sus, iar nivelul de intensitate corespunzător este afișat pe ecranul LCD. După o secundă, numărătoarea inversă este afișată din nou.
- Când intensitatea atinge nivelul maxim, apăsați din nou scurt pentru a reveni la nivelul 0 și opriți funcția de vid.
- La prima utilizare, se recomandă să începeți de la primul nivel sau până când pielea se adaptează

Buton cu lumină roșie

- Apăsați scurt acest buton pentru a aprinde sau stinge lumina roșie.
- Când această funcție este activată, este activată în mod implicit. Afișajul indică 1 și lumina roșie inferioară este aprinsă.
- Apăsați din nou scurt acest buton pentru a opri lumina roșie, pe afișaj va apărea 0 și lumina roșie inferioară se va stinge.

Buton de pauză/pornire cu o singură apăsare

- În timpul utilizării, acest buton poate fi utilizat pentru a întrerupe funcționarea sau pentru a elibera presiunea și a scoate rezervorul.
- Apăsați o dată scurt pentru a pune dispozitivul în pauză și a-l comuta în modul de așteptare. Apăsați din nou scurt pentru a opri funcția de adsorbție din canistre și a elibera presiunea, facilitând scoaterea canistrei.
- După eliberarea presiunii, apăsați din nou scurt pentru a reduce dispozitivul în starea de vid.

Notă: 1. Când utilizați acest dispozitiv cu produse periferice lichide, cum ar fi uleiuri esențiale, asigurați-vă că uleiurile esențiale sunt aplicate uniform pe suprafața pielii și că nu sunt prezente particule lichide vizibile.
Apoi așezați dispozitivul în locul dorit pentru utilizare.

2. Acest dispozitiv este proiectat cu atenție, cu un filtru care poate filtra majoritatea

impurităților granulare sau lichide în timpul utilizării produsului, pentru a proteja curățenia internă și a prelungi durata de viață a produsului. Verificați și înlocuiți regulat filtrul de bumbac în funcție de frecvența utilizării personale.



Deșurbați corpul transparent al recipientului

După înlocuirea filtrului de bumbac inclus, înlocuiți și instalați corpul transparent al recipientului.

Avertisment: Când utilizați rezervorul corespunzător, nu este posibilă eliberarea presiunii folosind butonul de pauză/eliberare de pe dispozitivul gazdă. În schimb, supapa de siguranță de pe rezervorul corespunzător trebuie trasă în sus pentru a elibera presiunea.

1. Pași de funcționare a rezervorului principal

1. Selectați dispozitivul de masaj, verificați-l și ștergeți-l. Selectați punctele de acupunctură și curățați pielea după cum este necesar pentru masaj. Alegeți o poziție confortabilă (inclusiv sezând, culcat pe spate, pe o parte sau pe burtă).
2. Apăsați butonul de pornire/mod pentru 1,5 secunde pentru a porni dispozitivul și utilizați butonul de reglare a puterii de aspirație pentru a selecta nivelul adecvat.
3. Dacă aveți nevoie de terapie cu lumină roșie, o puteți seta folosind butonul pentru terapie cu lumină roșie.
4. După terminarea masajului, utilizați butonul de pauză/eliberare pentru a elibera presiunea, scoateți instrumentul de masaj și opriți-l apăsând și ținând apăsat butonul de pornire/mod.

2. **Procedura pentru rezervorul de rezervă pentru versiunea clasică îmbunătățită și rezervorul corespunzător**
1. Scoateți dispozitivul de masaj, verificați-l și ștergeți-l. Selectați punctele de acupunctură în funcție de nevoile de masaj și curățați pielea. Alegeți o poziție confortabilă (inclusiv sezând, culcat pe spate, pe o parte pe burtă).
2. Înșurubați rezervorul de conversie în dispozitivul gazdă, apoi introduceți centrul rezervorului corespunzător în rezervorul de conversie, astfel încât corpul rezervorului și rezervorul de conversie să fie asamblate pe dispozitivul gazdă (așa cum se arată în figura 1).

3. Apăsați butonul de pornire timp de 1,5 secunde, porniți dispozitivul și utilizați butonul de intensitate a aspirației pentru a-l seta în poziția 12 (afișajul LCD indică 12).
4. Aliniați centrul dispozitivului de masaj cu punctul de acupunctură selectat, apăsați ușor cu o forță moderată, apăsați scurt butonul de pornire/mod pentru a selecta modul de vid profund, aspirați pielea timp de 10 secunde și, când simțiți tensiune pe piele, trageți dispozitivul în sus (așa cum se arată în figura 2) pentru a-l separa și a menține corpul dispozitivului pe suprafața corpului uman.

5. După terminarea masajului, trageți supapa de eliberare a presiunii de pe corpul cupei pentru a o îndepărta (așa cum se arată în figura 3) și apăsați și țineți apăsat butonul de pornire/mod pentru a opri dispozitivul.
3. **Pași de operare pentru iradierea cu lumină roșie și albastră pentru a menține cupele corespunzătoare pentru uz bancar**
1. Selectați dispozitivul de masaj, verificați-l și ștergeți-l. Selectați punctele de acupunctură și curățați pielea conform cerințelor pentru masaj. Alegeți o poziție confortabilă (sezând, culcat pe spate, pe o parte sau pe burtă).

2. Înșurubați rezervorul de conversie în dispozitivul principal, apoi introduceți centrul rezervorului corespunzător în rezervorul de conversie, astfel încât corpul rezervorului și rezervorul de conversie să fie asamblate pe dispozitivul principal (așa cum se arată în figura 4).
3. Apăsați butonul de pornire timp de 1,5 secunde, porniți dispozitivul și utilizați butonul de intensitate a aspirației pentru a-l seta în poziția 12 (afișajul LCD indică 12).

4. Aliniați centrul dispozitivului de masaj cu punctul de acupunctură selectat, apăsați ușor cu o forță moderată, apăsați scurt butonul de pornire/mod pentru a selecta modul de vid profund, aspirați pielea timp de 10 secunde și, când simțiți tensiune pe piele, trageți dispozitivul în sus (așa cum se arată în figura 5) pentru a-l separa și a menține corpul dispozitivului pe suprafața corpului uman.
5. Apăsați scurt comutatorul luminii roșii și albastre de pe corpul cupei pentru a activa funcția de iradiere cu lumină roșie și albastră, care funcționează în modul de iradiere cu lumină roșie, iradiere cu lumină albastră, iradiere cu lumină roșie și albastră și ciclul de iradiere oprit.

9. După terminarea masajului, trageți supapa de eliberare a presiunii de pe corpul recipientului pentru a o îndepărta (așa cum se arată în figura 6) și opriți dispozitivul apăsând și ținând apăsat butonul de alimentare/mod.
10. Metoda de înlocuire a filtrului de bumbac din rezervorul corespunzător este aceeași ca în dispozitivul gazdă (așa cum se arată în figura 7).



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Figura 5

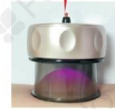


Figura 6



Figura 7

Instrucțiuni de încărcare

1. Conectați cablul de încărcare de tip C la priză adaptorului și conectați celălalt capăt la interfața de încărcare a produsului pentru a începe încărcarea. Tip adaptor: 5V+2A.
2. Vă rugăm să păstrați portul de încărcare de tip C uscat și curat în timpul încărcării. Timpul de încărcare poate varia ușor în funcție de condițiile de mediu, iar timpul real va fi decisiv. Nu depășiți timpul de încărcare de 8 ore.
3. În timpul încărcării dispozitivului gazdă, indicatorul luminos al bateriei clipește și se stinge când bateria este complet încărcată.
4. Indicatorul luminos roșu este aprins în permanență atunci când se încarcă o combinație de cartușe roșii și albastre și se stinge când încărcarea este completă. 5. Produsul se încarcă și nu poate fi pornit pentru utilizare.

Măsurile de siguranță

⚠ Periculos (Conținut asociat: Utilizarea incorectă poate provoca leziuni grave)

- Nu utilizați simultan următoarele dispozitive medicale electronice, deoarece acest lucru poate provoca defecțiuni sau deteriorarea dispozitivului medical, care pot pune în pericol viața!
1. Dispozitive electronice medicale implantabile, cum ar fi stimulatoare cardiace;

- 2. Înimile și plămânii artificiali și alte dispozitive medicale electronice de salvare a vieții;
- 3. Dispozitive medicale electronice, cum ar fi electrocardiografe;
- 4. Alți pacienți cu dispozitive medicale implantate.

- Nu utilizați produsul în următoarele situații pentru a preveni accidentele sau disconfortul.

1. Femeile însărcinate, femeile în perioada menstruală, pacienții cu leziuni ale pielii, pacienții cu varice pe corp și pacienții care iau medicamente.
2. Este interzisă utilizarea la pacienți cu boli infecțioase, piele sensibilă, pacienți după operații, pacienți cu febră mare sau pacienți cu boli grave.
3. Nu utilizați pe pielea foarte sensibilă, cu umflături, ulcerări, ulcere, furuncule sau noduli inexplicabili la suprafața corpului sau în cazuri acute.

Entorsele, zonele dureroase, rănilor și fracturile traumatice care nu s-au vindecat sunt interzise. Cicatricile, tumorile maligne, varicele locale, vasele de sânge mari de la suprafața corpului și pielea locală cu elasticitate redusă – utilizarea este, de asemenea, interzisă.

4. Pacienți cu probleme cardiace, nervoase cerebrale și de tensiune arterială.
5. Neuroticism sever, convulsii, spasme și agitație maniacală.

6. Afecțiuni cu tendință de sângerare, cum ar fi tromboцитopenie, leucemie, hemofilie, purpură alergică și alte tulburări de sângerare.
7. În apropierea inimii, a trăsăturilor faciale, a zonelor intime sau a vaselor sanguine mari de la suprafața corpului.
8. Pacienți cu tulburări de percepție cutanată sau anomalii ale pielii.
9. Pacienți care urmează un tratament medical sau care se simt anormal din punct de vedere fizic.
10. Persoane care sunt excesiv de obosite, intoxicate sau care stau treze până târziu în noaptea (de asemenea, interzis cu 2 ore înainte și după mese).
11. Pacienți cu alergii cutanate la metale și la lumina roșie.
12. Produsul are o suprafață încălzitoare, este sensibil la căldură, copiii nu pot să-și exprime liber dorințele sau să aibă grijă de ei înșiși.

⚠ Atenție (Conținut conex: Utilizarea incorectă poate provoca leziuni grave)

1. Vă rugăm să utilizați acest produs în mod corect, conform instrucțiunilor de utilizare.
2. Când utilizați produsul, corpul transparent trebuie să fie în contact cu pielea pentru a preveni contactul cu răni și cicatrici.
3. Utilizarea prelungită a a ceea ce este rănit de acest produs poate provoca arsuri din cauza temperaturilor scăzute sau iritații ale pielii. Vă rugăm să acordați atenție observării și utilizării.
4. Dacă vă simțiți rău în timpul utilizării sau după utilizare, opriți imediat și consultați un medic.
5. Recomandăm utilizarea de către un singur utilizator. Atunci când este utilizat de mai mulți utilizatori opriți și curățați rezervorul transparent înainte de utilizare.
6. Nu utilizați borcane transparente cu fisuri sau deteriorate.
7. După utilizarea acestui produs, pot apărea roșeață sau erupții, ceea ce este normal și dispare de obicei în mod natural în decurs de 2 zile (în funcție de tipul de piele al fiecărei persoane).
8. Când produsul este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, suprafața se va încălzi, ceea ce este normal.
9. Dacă observați orice anomalie, îndepărtați imediat produsul.
10. Nu utilizați acest produs în timp ce conduceți.
11. Nu conectați sau deconectați cablul de încărcare USB cu mâinile ude, pentru a preveni electrocutarea sau accidentele.
12. Acest produs conține baterii cu litiu. Nu dezamblați, modificați, scufundați în apă sau aruncați în foc pentru a preveni deteriorarea produsului și explozia.
13. Dacă vasele de sânge de la suprafața pielii se dilată după utilizare, se recomandă să vă odihniți timp de 45 de minute înainte de a face baie.
14. Acest produs nu poate înlocui dispozitivele medicale sau medicamentele.
15. Utilizatorii care folosesc produsul pentru prima dată trebuie să aleagă bancuri mici pentru a reduce iritarea

Curățare și întreținere

Respectați instrucțiunile de siguranță și întreținere pentru a prelungi durata de viață a dispozitivului:

1. Utilizați o cârpă uscată, netesută, pentru a șterge corpul. Nu utilizați solvenți precum agenți de curățare pe bază de acid, alcool, diluanți, benzină, lac de unghii etc. pentru curățare.
2. După fiecare utilizare, opriți alimentarea înainte de curățare (cu o cârpă uscată).
3. Depozitați acest produs într-un loc sigur și uscat.
4. Nu utilizați acest produs când este umed.
5. Nu utilizați perii dure sau bile din oțel inoxidabil pentru curățare, pentru a evita deteriorarea suprafeței.
6. Nu utilizați lichide precum apa pentru a curăța dispozitivul, deoarece acest lucru poate provoca inhalarea directă.
7. Dacă acest produs nu este utilizat pentru o perioadă îndelungată, încărcări regulate pentru a asigura funcționarea normală.

Nu utilizați și nu depozitați acest produs în următoarele locuri:

Locuri predispușe la vibrații și socuri; Locuri expuse la lumina directă a soarelui; Locuri calde și umede; Locuri cu apă; Câmpuri electromagnetice puternice; În apropierea artificilor; Locuri accesibile copiilor etc.

Analiza defectelor și depanare

Apariția unei defecțiuni	Diagnosticare și depanare
Nu se poate porni	1. Pentru a porni dispozitivul, apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare mai mult de 1,5 secunde. 2. Încărcați dispozitivul și încercați din nou.
Nu se încarcă	1. Înlocuiți adaptorul cu o priză standard și încercați din nou. 2. Deconectați și reintroduceți capul de încărcare și verificați dacă este introdus corect. 3. Verificați dacă capul de încărcare și portul de încărcare sunt murdare sau au resturi și curățați-le dacă este necesar. 4. Înlocuiți adaptorul sau cablul de încărcare.
Aspirație slabă	1. Scoateți rezervorul transparent și strângeți-l din nou pentru instalare. 2. Verificați dacă orificiile de admisie și evacuare nu sunt blocate. 3. Verificați dacă filtrul de bumbac trebuie înlocuit.

⚠ Dacă problema nu poate fi rezolvată, nu dezamblați dispozitivul fără permisiune.

Staturi utile:

1. La prima utilizare, acordați atenție reglării treptate pentru a găsi modul și intensitatea potrivite pentru dvs.
2. În modul de vid profund, când aspirația atinge un anumit nivel, apăsați la timp butonul de eliberare și pauză pentru a opri funcționarea sau eliberați presiunea pentru a preveni disconfortul pielii.