



Dispozitiv cosmetic 5in1 Elegante 1897

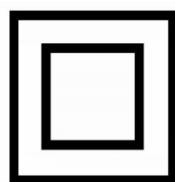

CE

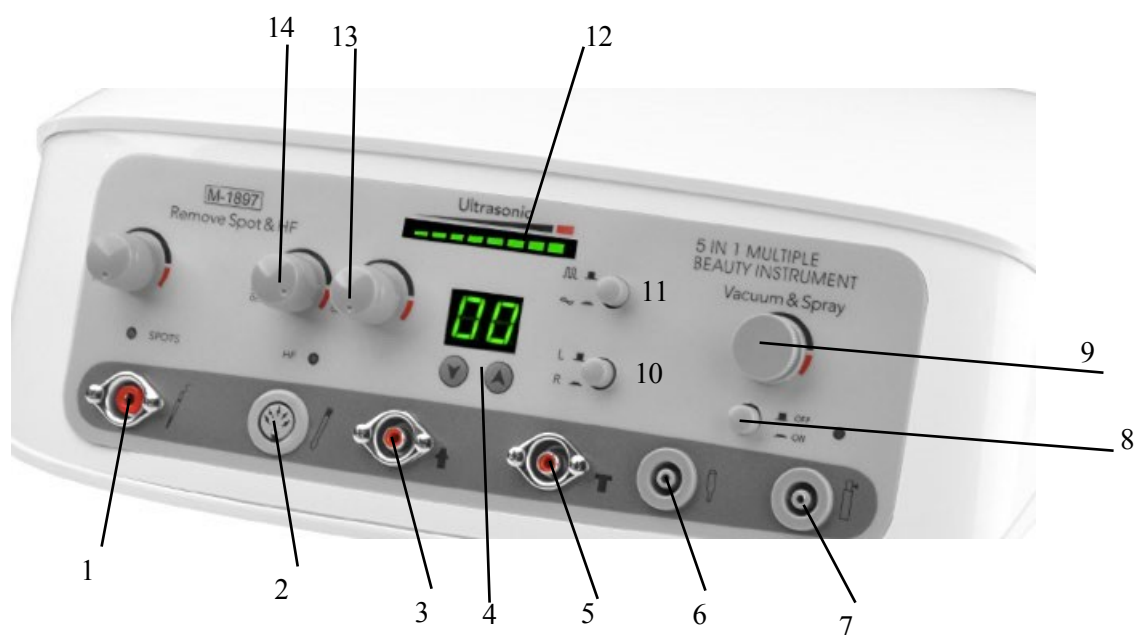

- ☐ Conectarea electrocoagulării,
- ☐ Conexiunea Darsonvala,
- ☐ Conectarea capului la ultrasunete,
- ☐ Setarea timpului,
- ☐ Conectarea capului la ultrasunete,
- ☐ Unitate de aspirare și conexiune pentru microdermabraziune,
- ☐ Racord de pulverizare,
- ☐ Pornirea/oprirea unității de aspirare și microdermabraziune,
- ☐ Reglarea puterii de aspirare,
- ☐ Selectarea capului de tratament cu ultrasunete,
- ☐ Selectarea undei cu ultrasunete pentru tratament,
- ☐ Afișajul intensității ultrasunetelor,
- ☐ Reglarea intensității ultrasunetelor,
- ☐ Setarea intensității Darsonval.

DARSONVAL

Curenții d'Arsonval sunt o formă de curenți de înaltă frecvență. Dispozitivul generează ozon prin intermediul descărcărilor electrostatice care sunt generate în electrozi (peleți).

Efectul curenților d'Arsonval se bazează în principal pe acțiunea asupra vaselor de sânge și a terminațiilor nervoase autonome. Scânteele care se produc între electrod și piele determină dilatarea vaselor de sânge și afectează țesutul subcutanat. Ozonul produs are un efect dezinfectant.

Tratamentul durează între 5 și 7 minute.

Indicații:

- Tulburări de curățare a pielii,
- Alopecia areata (ringworm),
- Stimularea circulației sângelui,
- Dezinfectarea pielii.

ULTRAZVUK

Este un sistem de transport al substanțelor active către straturile profunde ale pielii. Dispozitivul utilizează un fenomen fizic care are loc în membranele celulare sub influența ultrasunetelor - datorită acestui fapt, efectul unui singur tratament persistă în piele timp de până la 72 de ore.

Tratamentul este complet nedureros, clientul poate simți vibrații blânde provenind din cap.

SPRAY

Se utilizează pentru tonifierea delicată a pielii prin intermediul unui vacuum și al unui tonic plasat într-un recipient.

MICRODERMABRAZIUNE

Este un tratament în timpul căruia straturile superficiale ale pielii sunt îndepărtate folosind capete abrazive diamantate și putere de aspirație.

Microdermabraziunea este eficientă în reducerea liniilor fine, a ridurilor din jurul ochilor (picioare de corb), a petelor pigmentare și a cicatricilor de acnee. Ea stimulează producția de celule cutanate și de collagen.

Este o procedură cosmetică neinvazivă foarte populară. Cu o utilizare regulată, aceasta produce rezultate excelente pentru toate tipurile de piele. Rezultatele sunt vizibile imediat.

Indicații:

- Cicatrici de acnee,
- Comedoane (puncte negre), milia (puncte albe),
- Pori dilatați,
- Piele aspră, corodată,
- Pierderea fermității pielii,
- Întinerește pielea și elimină liniile fine din jurul ochilor, gurii și gâtului,
- Strie,
- Uscăciunea pielii,
- Pete pigmentare și depigmentare,
- Daune solare la nivelul pielii (față, mâini, gât),
- Keratoză în jurul foliculilor de păr,



Contraindicații

- Infecții virale,
- Infecții bacteriene,
- Infecții fungice,
- Acnee purulentă și inflamatorie,
- Rozaceea (rozaceea),
- Pielea pleoapelor,

- Continuitatea pielii rupte (răni deschise),
- Tumori ale pielii și alunițe,
- Hemangioame (tumori vasculare cavernoase),
- Tratamentul acneei cu Roaccutane (se recomandă o pauză de minimum 3 luni),
- O tendință de formare a cicatricilor cheloide,
- Intervenții chirurgicale în zona facială (se recomandă o pauză de minimum 2 luni).

Avertisment:

- Capetele de microdermabraziune trebuie să fie curate și dezinfectate.
- Tratamentul se efectuează pe pielea uscată.
- Filtrele de bumbac pentru microdermabraziune sunt concepute pentru o singură utilizare.
- Mișcările capului în timpul procedurii trebuie să fie ușoare și controlate.

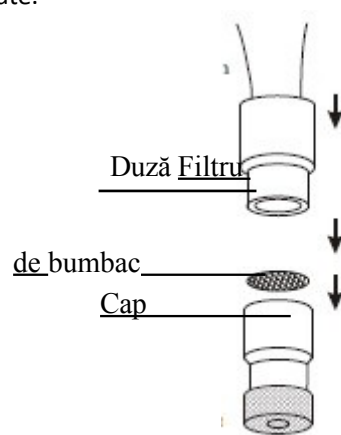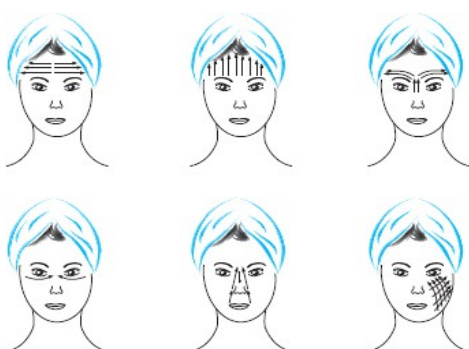

Vacuum

Este un tratament care utilizează puterea de aspirație și atașamente selectate corespunzător în funcție de zona care trebuie tratată.

Indicații:

- Comedoane (puncte negre)
- Pori dilatați,
- Pierderea fermității pielii,
- Strie
- Uscăciunea pielii.



MĂSURI DE SECURITATE

1. Dispozitivul este un dispozitiv profesional conceput pentru a fi utilizat în saloane de înfrumusețare. Acesta poate fi utilizat numai de către personal cosmetic calificat, ceea ce contribuie la prevenirea efectelor nedorite în timpul tratamentului.
2. Dispozitivul nu trebuie dezamblat sau utilizat în alte scopuri decât cele specificate în acest manual de utilizare. Toate întreținerea și reparațiile trebuie efectuate numai de către un tehnician de service autorizat .
3. Dispozitivul nu trebuie instalat sau utilizat în apropierea lichidelor, în locuri umede sau cu mâinile ude - astfel încât lichidul să nu pătrundă în dispozitiv.

4. În următoarele cazuri, trebuie să deconectați imediat dispozitivul de la rețea și să contactați service autorizat
 - a) lichidul a intrat în dispozitiv,
 - b) aparatul emite mirosuri, fum sau sunete neobișnuite,
 - c) cablul de alimentare este deteriorat,
 - d) dispozitivul a căzut sau capacul său este deteriorat.
 5. Nu pot fi plasate obiecte pe cabluri. Echipamentul nu trebuie instalat în locuri în care cablul de alimentare poate fi prins.
 6. Din motive de siguranță, cablul de alimentare trebuie să fie scos din priză după fiecare utilizare.
 7. Nimic nu poate fi introdus în orificiile din dispozitiv. Dacă un obiect străin pătrunde în deschidere, cablul trebuie deconectat imediat și trebuie contactat distribuitorul sau producătorul.
 8. Echipamentul nu trebuie așezat pe un cărucior instabil, pe un raft sau pe un suport mobil. Acesta poate fi deteriorat dacă cade.
 9. Pentru a asigura durata de viață preconizată a echipamentului, se recomandă menținerea unui interval de cel puțin un minute între pornirea și oprirea dispozitivului (și viceversa).
 10. Sursa de alimentare trebuie să fie conformă cu specificațiile afișate pe plăcuța de identificare. În caz contrar, există riscul de funcționare incorectă, deteriorare sau chiar ardere a echipamentului.
-

NOTĂ:

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altei defecțiuni, vă rugăm să contactați un centru de service autorizat - acest lucru va preveni riscul de pericol.
 2. Acest dispozitiv poate fi utilizat numai de copii începând cu vârsta de 8 ani și de persoane cu abilități fizice sau mentale reduse sau fără experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheați sau au fost instruiți cu privire la utilizarea în siguranță a dispozitivului și înțeleg riscurile implicate.
 3. Dispozitivul nu este destinat copiilor pentru a se juca cu el. Copiilor nu le este permis să se joace cu dispozitivul.
 4. Nu lăsați dispozitivul nesupravegheat dacă în apropierea acestuia se află copii sau persoane nesupravegheate. cunoștințe suficiente privind utilizarea acestuia.
 5. Acest dispozitiv electric nu este o jucărie. Utilizarea necorespunzătoare sau contactul cu dispozitivul poate cauza un pericol pentru sănătate sau viață - prin urmare, dispozitivul trebuie utilizat și ținut departe de îndemâna copiilor.
-

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR

Echipamentele electrice uzate, accesoriile și ambalajele trebuie duse la punctele de colectare pentru reciclare în conformitate cu normele de protecție a mediului. Echipamentele electrice nu trebuie aruncate în deșeurile municipale.

Trebuie respectate reglementările aplicabile privind eliminarea acestui tip de echipament.

Pentru a proteja mediul, în conformitate cu Directiva 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, echipamentele vechi trebuie colectate separat și apoi predate la punctele de colectare a deșeurilor electronice.

Chiar și la sfârșitul duratei sale de viață, dispozitivul conține componente adecvate pentru reciclare și trebuie dus la un punct de reciclare.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Dispozitivul trebuie transportat la o temperatură cuprinsă între -20 °C și +50 °C numai în ambalajul său original. Acesta trebuie depozitat într-un loc bine ventilat, cu o umiditate relativă care să nu depășească 75 %. Temperatura de funcționare este cuprinsă între +10 °C și +40 °C.

În timpul depozitării și transportului, echipamentul nu trebuie să cadă, să fie scăpat, supus la șocuri mecanice sau la condiții meteorologice nefavorabile.