

Steamer cosmetic Azzurro H1106 Sonia

Caracteristicile produsului

>Funcții H1106

Noul aspect, baza reglabilă din oțel inoxidabil, lumina ultravioletă încorporată, cupa de apă filetată și inelul de conectare a scurgerii etanșe, previne în mare măsură scurgerile de apă și gaze.

Brațul pulverizatorului cu design special pentru o gamă largă de aplicații, capul pulverizatorului poate fi reglat cu 60 de grade înainte. Dar, de asemenea, controlul prin microcomputer, reglaj al treilea abur de viteză, monitorizați automat nivelul apei. Această mașină are un sistem automat de avertizare de monitorizare a celui mai înalt nivel al apei, în caz de nivel scăzut al apei pentru a deteriora setul de încălzire sau apariția unor probleme ascunse de atomizare din cauza nivelului prea ridicat al apei. În plus, se elimină problemele de siguranță cauzate de un abur fără apă.



• Funcție:

- 1) Înmoaie celulele moarte de la suprafața pielii pentru o curățare ulterioară.
- 2) Dilată porii pielii pentru o curățare profundă.
- 3) Pătrunde în porii pielii, înmuind murdăria acumulată de ulei, coșuri, reziduuri cosmetice și impurități, făcând curățarea ulterioară mai eficientă.
- 4) Ajută porii pielii să elimine toxinele
- 5) Înmoaie temporar ridurile.
- 6) Acesta poate accelera circulația sângelui, poate adăuga apă celulelor și poate îmbunătăți metabolismul și autoregenerarea celulelor pielii.
- 7) Prin tratamentul cu aromaterapie, se stimulează nervul parțial și se tratează eficient funcțiile fizice.

• Specificații și date tehnice:

Denumirea produsului	Steamer pentru față
Nu.Articole	H1106
Caracteristică	Steamer pentru față
Nominal tensiune/putere	AC 110-130V/750W AC 220-240V/800W
Funcționare Frecvența	50/60HZ
Dimensiuni	1100*390*280mm
Greutate netă	5,2 KG


• Conținutul pachetului

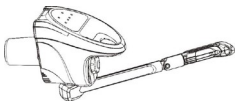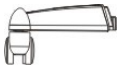Articolul	Descrierea produsului	MINORITATEA
Dispozitiv gazdă		1 CONTROL
Coloană		1 PIECE
Stand cu cinci picioare		5 PIECES
Baza de cinci picioare		1KUS
Placă capac cinci picioare		1KUS

Șuruburi M10		1 SET
Cheie		1 PIECE
Esențe de bumbac. ulei		2 PIECES
Manșon de fixare		1 PIECE

Manual de utilizare


1 CONTROL

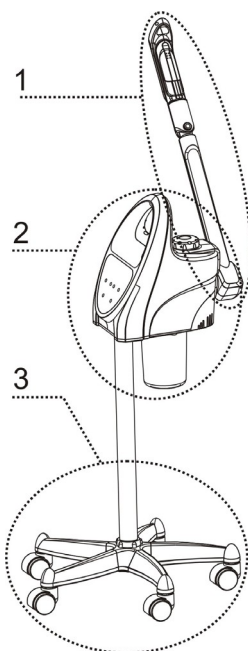

• Descrierea structurii vaporizatorului

1. Kit braț de pulverizare
2. Dispozitiv gazdă
3. Stand


• Kit braț de pulverizare

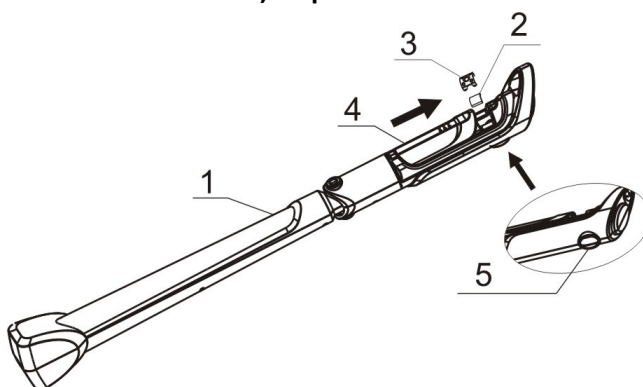


1. Braț de pulverizare
2. Bumbac pentru ulei esențial
3. Mașină de spălat pentru ulei esențial
4. Capac glisant pentru ulei esențial
5. Ieșire abur

• Descrierea dispozitivului gazdă



1. Acoperire
2. Panou de control
3. Mâner gazdă
4. Cameră de atomizare
5. Pahar pentru apă
6. Tub de încălzire
7. Starter
8. Baza de asigurare
9. Cablu de alimentare

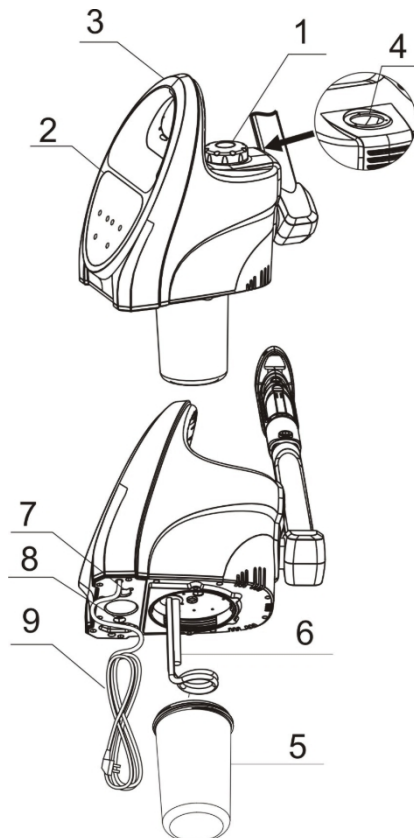

• Descrierea standului

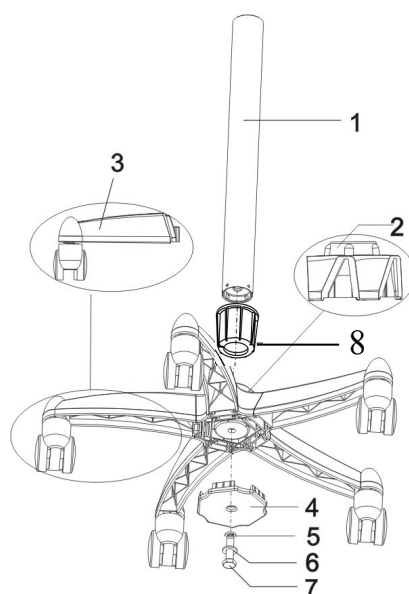

1. Coloană
2. Baza de cinci picioare
3. Stand cu cinci picioare
4. Placă de acoperire cu cinci picioare
5. Arc de laminare Ø10
6. Șaibă de demarcație plată Ø10
7. Șurub M10
8. Manșon de fixare

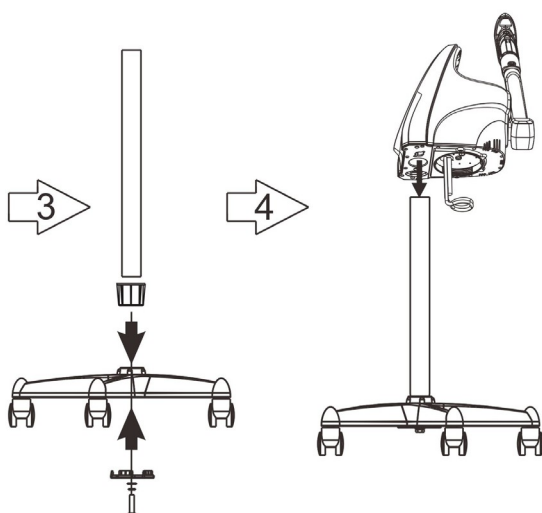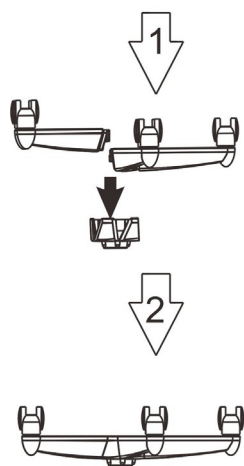

● Instrucțiuni de asamblare:

Pasul 1: Împingeți capacul de cinci picioare în baza de cinci picioare

Pasul 2, 3: Setați stâlpul combinat cu manșonul de fixare în baza celor cinci picioare;


Fixați capacul plăcii celor cinci picioare la cele cinci picioare;

Așezați șaiba plată și laminarea arcului pe

șuruburile M10, apoi fixați capacul plăcii celor cinci picioare și cele cinci picioare la stâlp cu șuruburile M10.

Pasul 4: Puneți dispozitivul gazdă pe stâlp.

● Descrierea panoului:

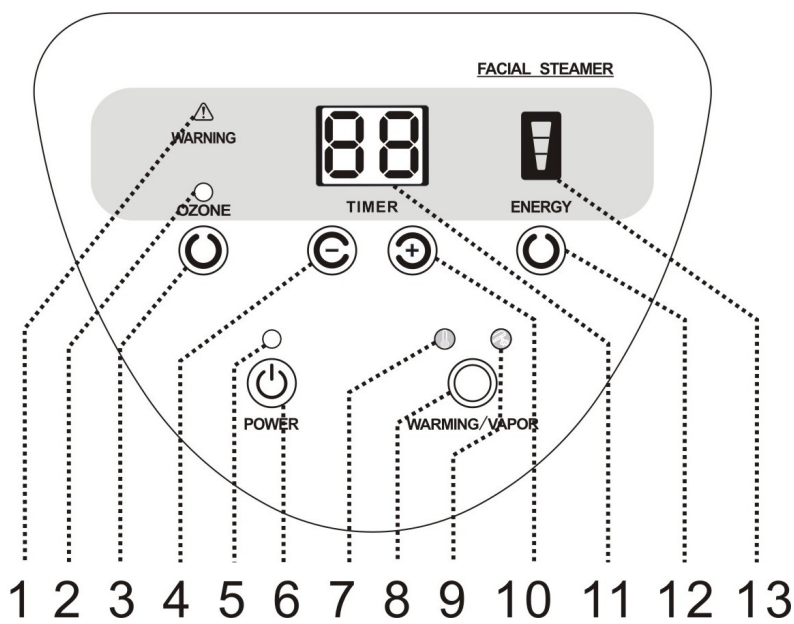

1. Lumină de avertizare indicatoare la nivel ridicat /

Nivel scăzut al apei

2. Indicator luminos de activitate a ozonului

3. Comutator de ozon

4. Butonul de reducere a timpului

5. Lumină de indicare a alimentării

6. Întrerupător principal

7. Lumina de indicare a activității încălzitorului

8. Încălzire sau abur fierbinte Buton de pornire

9. Indicatorul luminos de activitate a aburului fierbinte

10. Buton de creștere a timpului

11. Fereastra de afișare a timpului


12. Butonul de selectare a energiei

13. Fereastră de afișare a energiei

● Instrucțiuni de utilizare

1. Deblocarea brațului de pulverizare:

Când scoateți întreaga unitate din ambalaj, brațul de pulverizare este blocat într-o poziție fixă. Trageți blocajul de fixare cu o mână (în direcția săgeții negre din imagine), rotiți brațul de pulverizare în poziție orizontală cu cealaltă mână

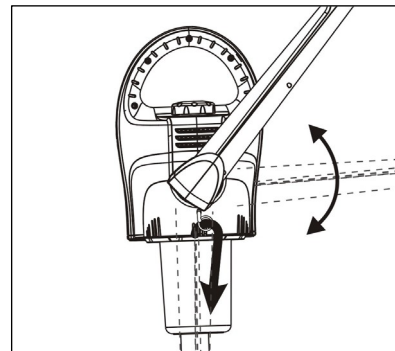

(ca în ilustrația următoare), eliberați dispozitivul de blocare a brațului de pulverizare pentru a finaliza deblocarea brațului de pulverizare. Înainte de aplicare, verificați deblocarea brațului de pulverizare și reglați la 130 de grade.


2. Reglarea brațului de pulverizare și a capului de pulverizare:

Braț de pulverizare cu design special. Acesta poate fi reglat la unghiuri diferite pentru a se potrivi diferitelor medii. Ca în imaginea următoare:

130 de grade pot fi ajustate de la stânga la dreapta.

60 de grade pot fi reglate din față în spate. Capul de pulverizare poate fi rotit la 360 de grade.

Brațul de pulverizare poate fi utilizat numai în limitele definite. În cazul în care o

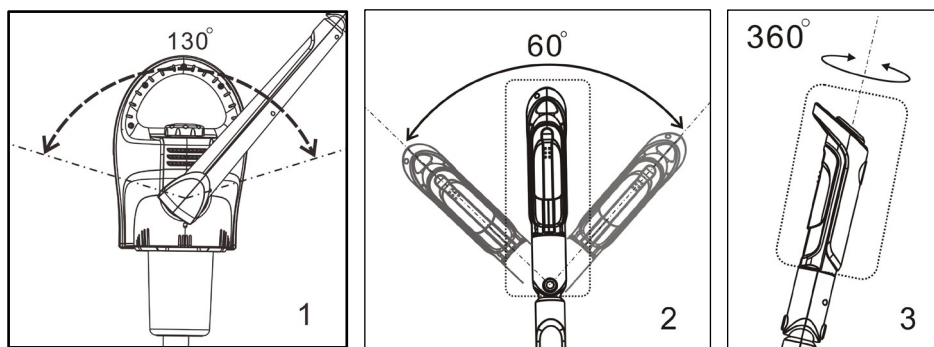

setarea în afara limitei, apa va stropi sau va fi deteriorată, ceea ce nu va fi acoperit de garanție. Nu reglați brațul prea puternic sau articulațiile interne ale brațului de pulverizare vor fi deteriorate.


3. Se toarnă apă în pahar:

După ce ați deschis capacul plantei medicinale, turnați apă în pahar.

Nivelul apei trebuie să se situeze între nivelul cel mai ridicat și cel mai scăzut al apei (după cum se arată în figură).


4. Adăos de ulei esențial:

Dacă este necesară terapia prin pulverizare cu ulei esențial, deschideți capacul glisant pentru ulei esențial din partea superioară a duzei și utilizați bureta pentru a picura ulei esențial în paleta de bumbac (una sau două picături de ulei esențial vor fi suficiente). (Așa cum se arată în imaginea din dreapta.) Dacă trebuie să schimbați uleiul esențial, scoateți baza de ulei esențial cu o pensetă și înlocuiți paleta de bumbac. Resetați-o și adăugați noul ulei esențial.

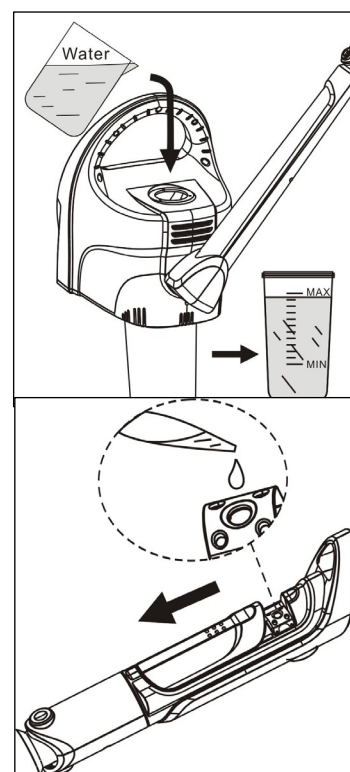

5. Instalarea și îndepărtarea paharului de apă:

Deconectați alimentarea înainte de a scoate cupa de apă. Lăsați cupa cu apă să se răcească și apoi scoateți-o. Țineți capacul plantei medicinale cu o mână și rotiți în sensul acelor de ceasornic ținând partea de jos a borcanului cu cealaltă mână. În caz contrar, deconectați alimentarea înainte de a scoate paharul cu apă. Țineți capacul medicamentului pe bază de plante într-o mână și rotiți în sensul invers acelor de ceasornic ținând partea de jos a borcanului în cealaltă mână. (așa cum se arată în ilustrație).

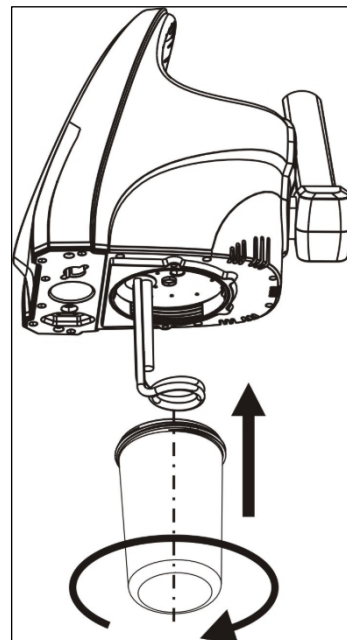

Funcționarea panoului de control:

1, Conectați fișa de rețea

2, " " Indicatorul de alimentare din butonul de alimentare este aprins " " după ce butonul de alimentare este pornit " ", motorul intră în modul de așteptare.

-Fereastra de timp afișează "15"minute.

- " " în fereastra de energie a fost afișat cel mai înalt nivel.

Lumina indicatorului stării de funcționare a ozonului " " de pe " " comutatorul de ozon " " este oprit.

Lumina indicatorului stării de funcționare a atomizorului " " sau " " de pe comutatorul " " HEATING/ STEAM este stinsă.

3, Porniți butonul de comutare a jetului fierbinte " HEATING/ STEAM " .

-porniți comutatorul "HEATING/ STEAM " , lumina indicatorului stării de funcționare a atomizorului " " "on " "se aprinde. În acest moment, gazda începe să se încălzească, aburul este evacuat din duză timp de aproximativ șase minute.

-porniți comutatorul "HEATING/ STEAM " , se aprinde indicatorul de stare de funcționare HEATING " " "on " "se aprinde. În acest moment, gazda va începe să se încălzească.

4, setarea timpului

Apăsăți " " și " " pentru TIMER" pentru a seta timpul de lucru necesar.

Când indicatorul stării de funcționare a aspersorului se aprinde " " , intervalul de timp este de la 1 la 30 de minute, valoarea implicită este de 15 min.

Când indicatorul stării de funcționare se aprinde " " , intervalul de timp este de la 1 la 90 de minute, valoarea implicită este 30 min.

5, setarea energiei:

Apăsați "ENERGY"  "pentru a selecta puterea aburului, opțiunile sunt abur mare, mediu și mic;  " iluminarea completă a ferestrei de afișare înseamnă cea mai mare energie, opusul înseamnă cea mai mică energie. Trebuie să selectați cel mai înalt nivel înainte de a utiliza aburul, apoi să reglați aburul după cum este necesar.

6, Dezactivați funcția de ozon.

Apăsați comutatorul de ozon "  ", indicatorul luminos al stării de funcționare a ozonului "  " se aprinde; conducta de ozon se aprinde acum, ozonul aparent miroase a vapori cu un fenomen de atomizare diferit.

7, funcția de detectare a nivelului de apă

Dispozitivul gazdă detectează automat nivelul apei atunci când încălzește "  " sau "  ". Atunci când nivelul apei este nivelul normal (nivelul apei între maxim și minim), dispozitivul gazdă va încălzi continuu;

Dacă nivelul apei este detectat prea ridicat sau prea scăzut (când nivelul apei este prea ridicat, fereastra de afișare a timpului afișează "E2", când nivelul apei este prea scăzut, fereastra de afișare a timpului afișează "E1"), dispozitivul gazdă va opri imediat încălzirea.

În acest moment, lumina indicatorului "  " sau "  " din butonul " **HEATING/ STEAM** "  " este stinsă. Buzzerul emite continuu semnalul de avertizare "de de" până când nivelul apei atinge nivelul normal al apei și deblochează toate butoanele blocate, în acest moment apăsați " **HEATING/ STEAM** "  " pentru a relua funcționarea

● Atenție:

1. Înainte de a porni alimentarea unității gazdă, asigurați-vă că paharul cu apă este înșurubat, că nivelul apei se află între marcajul de nivel cel mai înalt și cel mai scăzut, iar capacul de pe orificiul pentru apă este strâns.
2. Dacă este necesar să adăugați ulei esențial în timpul funcționării, adăugați-l numai după ce jetul de abur s-a oprit.
3. În fiecare zi, după terminarea ingerării atomizorului de aromaterapie, paleta de bumbac din baza de ulei esențial trebuie curățată.
4. Trebuie să așteptați până când aburul iese din orificiul de pulverizare în mod constant și bine proporționat înainte de a vă pulveriza fața.
5. Orificiul de pulverizare se află la 40 cm distanță de fața clientului, iar aburul trebuie pulverizat proporțional de la bărbia clientului la întreaga față pentru a evita scaldarea feței clientului cu aburul fierbinte pulverizat.
6. Ozonul are un efect de sterilizare, dar, de asemenea, deteriorează pielea și distruge substanțele nutritive ale uleiului pe bază de plante, deci este important să alegeți momentul potrivit pentru diferite tipuri de piele atunci când îl utilizați.
7. Nu supraîncărcați brațul pulverizatorului prin re poziționare excesivă pentru a preveni deteriorarea articulațiilor din interiorul brațului pulverizatorului.
8. Nu este permis să scoateți paharul cu apă imediat ce ați terminat de utilizat pulverizatorul, în caz contrar se vor produce arsuri. Vă rugăm să așteptați până când paharul cu apă se răcește, apoi scoateți-l.
9. Adăugarea de apă trebuie evitată, altfel nu numai că va avea efecte negative asupra dispozitivului gazdă, dar poate provoca și problema scurgerilor de electricitate
10. În cazul în care există probleme de scurgere a apei și de scurgere a gazelor sub aparatul gazdă sau pe capacul medicamentului pe bază de plante, asigurați-vă că opriți mai întâi alimentarea aparatului gazdă și apoi verificați dacă borcanul cu apă sau capacul medicamentului pe bază de plante sunt bine asamblate. Dacă problemele persistă, contactați agenția locală pentru soluții suplimentare.
11. Ar trebui să aibă o împănământare bună pentru fișa de alimentare a dispozitivului gazdă.
12. Atenție la nivelul apei din paharul de apă în timpul funcționării.

● **Atenție!!!**

1. Este interzis să puneți materiale uleioase într-un pahar cu apă sau într-o plasă de plante; aceasta poate cauza o problemă cu stropirea apei.
2. Este interzisă utilizarea apei de la robinet sau a apei cu impurități mari. Recomandăm utilizarea apei purificate, a apei distilate sau a apei filtrate, în caz contrar aceasta va cauza eșecuri de detecție și fals pozitive.
3. Nu este permisă pulverizarea din partea superioară a feței prin orificiul de abur, în caz contrar putând apărea arsuri.
4. Nu este permis să scoateți paharul cu apă atunci când aparatul este în funcțiune.
5. Nu este permisă utilizarea acestui dispozitiv într-un mediu prea umed, de exemplu: baie etc.
6. Nu este permis să lucrați sub soare puternic, altfel va provoca multe tipuri de condiții instabile.
7. Dacă există o problemă excepțională, vă rugăm să contactați agenția și să reparați instrumentul de către un reparator profesionist, în loc să deschideți capacul instrumentului gazdă pentru a fi reparat de VOI.
8. Dacă cablul de alimentare este distrus, este mai bine să utilizați accesoriile originale. Nu este permisă repararea dispozitivului de către personal neprofesionist; trebuie să vizitați un atelier de reparații desemnat cu privire la înlocuire.

● **Întreținere**

- Schimbați apa curată în fiecare zi înainte de utilizare. Curățați bine cupa de apă după terminarea funcționării și evitați acumularea de apă și evitați acumularea de grăsime și alte reziduuri.
- Curățați setul de încălzire o dată pe săptămână. (Sfaturi: Pentru spălare, amestecați puțin acid acetic sau acid citric cu apă într-un pahar cu apă, după încălzire timp de 10 minute, apoi spălați tubul de încălzire cu apă curată).
- Acordați frecvent atenție nivelului apei din pahar.
- Prin curățarea dispozitivului după utilizare, veți evita acumularea de reziduuri cosmetice.

Dacă imaginea din manualul de instrucțiuni este diferită de produsul curent, manualul de instrucțiuni este valabil și pentru produsul curent. Compania noastră își rezervă dreptul de a aduce îmbunătățiri, vă rugăm să ne scuzați dacă nu vă informăm cu privire la îmbunătățire dacă aceasta nu afectează utilizarea normală.