SILVERFOX

F-311B / F-312B / F-313B / F-314B / F-315B / F-316B / F-317B / F-318B / F-319B

Aparat cosmetic

Manual de utilizare

Vă mulțumim că ați ales produsele noastre.
Înainte de utilizare, citiți cu atenție manualul de utilizare.
Compania își rezervă dreptul de a îmbunătăți designul și de a modifica produsele fără notificare prealabilă.

Cuprins

Despre acest manual ---- **1**

Instrucțiuni de siguranță ---- **1**

F-311B Spatulă cu ultrasunete – descriere și parametri ---- **2/3**

F-312B Ultrasunete – descriere și parametri ---- **4/5**

F-313B Galvanic – descriere și parametri ---- **6/7**

F-314B Înaltă frecvență – descriere și parametri ---- **8/9**

F-315B Perie rotativă – descriere și parametri ---- **10/11**

F-316B Vacuum și spray – descriere și parametri ---- **12/13**

F-317B Radiofrecvență – descriere și parametri ---- **14/15**

F-318B Ciocan rece și cald – descriere și parametri ---- **16/17**

F-319B Dermabraziune cu diamant – descriere și parametri ---- **18/19**

Remedierea problemelor ---- **20**

Despre acest manual

Acest manual servește exclusiv ca referință pentru operarea acestui model. Dacă manualul este folosit în alte scopuri, compania SILVERFOX nu își asumă nicio responsabilitate pentru consecințele rezultate. Toate informațiile din acest manual sunt protejate prin drepturi de autor și nu pot fi copiate sau traduse, nici măcar parțial, fără acordul scris al companiei SILVERFOX.

Instrucțiuni de siguranță


Pentru o utilizare corectă și sigură a produsului, citiți toate instrucțiunile înainte de utilizare!
Respectați toate măsurile de siguranță!

⚠	**Avertisment!**	**Indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la punerea gravă în pericol a vieții.** • Acest produs este destinat exclusiv cosmeticienilor cu calificare profesională. • Nu utilizați și nu depozitați produsul în medii umede, de exemplu în baie – există risc de defectare și de pericol. • Nu utilizați produsul în apropierea substanțelor inflamabile (de ex. alcool, diluant, benzină, dizolvant de ojă, spray-uri etc.). • Nu utilizați produsul în următoarele situații: când cablul de alimentare sau ștecherul este deteriorat ori se supraîncălzește; când ștecherul este slăbit în priză. • Nu conectați și nu deconectați cablul de alimentare cu mâinile ude și nu utilizați produsul în acest mod. • Asigurați-vă că tensiunea de lucru corespunde tensiunii nominale a produsului. • Înainte de utilizare, verificați ca ștecherul și conectorul cablului de alimentare să fie complet introduse, pentru a evita orice pericol. • Când nu utilizați produsul, opriți-l și scoateți ștecherul din priză. • Curățați periodic praful acumulat pe ștecher și pe conectorul cablului de alimentare, pentru ca umezeala, praful și alți factori să nu provoace defectarea izolației. • Utilizați exclusiv cablul de alimentare livrat cu acest produs. Nu îl folosiți la niciun alt aparat. • Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul produsului – se poate deforma și deteriora. • Nu lăsați la îndemâna copiilor. Nu permiteți copiilor să utilizeze produsul. • Nu modificați, nu dezasamblați și nu reparați singur produsul. Dacă este necesară o reparație, adresați-vă producătorului, reprezentantului sau unui service autorizat, pentru a evita orice pericol. • Dacă ștecherul este deteriorat, adresați-vă distribuitorului, centrului de service sau unei persoane cu calificarea și experiența necesare. • Utilizați produsul exclusiv în scopul indicat în acest manual. Nu utilizați accesorii nerecomandate de producător.
⚠	**Atenție!**	**Indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la rănirea persoanelor.** • În timpul utilizării, operatorul trebuie să acorde o atenție sporită siguranței persoanelor și a echipamentului. • Dacă produsul nu funcționează corect, încetați imediat utilizarea și contactați producătorul sau distribuitorul. • Manipulați cu grijă produsul și accesoriile. • Manipulați responsabil ambalajul, pentru a evita accidente precum sufocarea copiilor; nu îl lăsați la îndemâna copiilor.

◆ F-311B Spatulă cu ultrasunete



1. Întrerupător
2. Creșterea intensității +
3. Reducerea intensității –
4. Creșterea timpului +
5. Reducerea timpului –
6. Selector de mod
7. Start / Pauză

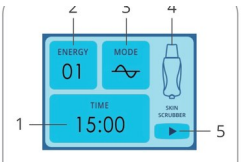

1. Timp
2. Nivel de intensitate
3. Selectarea modului
4. Stare de funcționare
5. Stare de operare



Brățară antistatică

Mod de utilizare

1. Introduceți spatula și brățara antistatică în conectorii corespunzători ai aparatului cosmetic. Când aparatul este conectat corect la cablul de alimentare, butonul „Power switch“ luminează roșu. Apăsând butonul „Power Switch“ intrați în modul de lucru, iar butonul apare alb pe ecran. Aparatul este setat implicit pe ieșire cu undă continuă; intensitatea de nivel 1 este setată pentru 15 minute.
2. În funcție de necesități puteți alege diferite moduri – apăsând butonul „Mode switch“ selectați modul de ieșire potrivit al sondei: undă continuă, undă intermitentă sau undă mixtă.
3. Cu butoanele „Time increase/decrease“ setați timpul de lucru între 1 și 30 de minute.
4. Înainte de a apăsa butonul „Start“/„Pause“, montați clientului brățara antistatică. Nivelul de intensitate se poate regla de la 1 la 10.
5. Dacă brățara antistatică este scoasă în timpul tratamentului, aparatul se oprește automat.
6. Dacă doriți să opriți aparatul în timpul tratamentului, apăsați butonul „Pause“.
7. La finalul tratamentului opriți aparatul cu butonul „power switch“; butonul se va aprinde roșu. După scoaterea ștecherului din priză, curățați spatula și brățara antistatică cu alcool 75% și depozitați-le într-un loc uscat.

Durata recomandată a aplicării

În cazul unei pieli normale, tratamentul nu trebuie să depășească 15 minute.

Atenționări privind utilizarea

⚠ Avertisment

- Când aparatul este pornit, nu atingeți conectorul de ieșire al spatulei.
- Nu aplicați spatula direct pe ochi.
- Utilizarea este interzisă la următoarele persoane:
  ① clienți alergici;
  ② arsuri, opăriri, arsuri solare, inflamații sau alte leziuni ale pielii;
  ③ clienți cu boli cardiace, boli infecțioase, afecțiuni neurologice și clienți care au metal în corp în timpul tratamentului.
- Nu lăsați capul spatulei în funcțiune într-un singur punct al pielii, pentru a nu o deteriora.
- Dacă suprafața pielii nu este suficient hidratată cu cremă, completați la timp.
- În timpul lucrului cu spatula, acordați atenție presiunii și unghiului dintre spatulă și piele.
- În timpul lucrului, acordați atenție conexiunii dintre accesoriu și aparat. Nu trageți excesiv de cablu, pentru a nu slăbi conexiunea.
- În timpul lucrului, aveți grijă ca aparatul să nu fie stropit cu apă sau cu alte lichide corozive.
- Nu utilizați spatula cu suprafața din inox deformată sau deteriorată, pentru a nu răni pielea.
- În orice situație neobișnuită, contactați distribuitorul și solicitați verificarea de către un service autorizat; nu deschideți singur aparatul pentru reparații.


⚠ Atenție

- Păstrați spatula permanent curată și dezinfectați-o cu alcool 75% după fiecare utilizare.
- Staționarea într-un singur punct al pielii nu trebuie să depășească 5 secunde.


Parametrii produsului

Model produs	F-311B
Alimentare	AC 100V–240V, 50/60Hz
Putere consumată	10W
Dimensiunile produsului	20.8×23×7.5 cm
Dimensiunile ambalajului	37×27.5×14 cm
Conținutul ambalajului	**Unitate principală × 1**
	Raft pentru accesorii × 1
	Spatulă × 1
	Brățară antistatică × 1
	Cablu de alimentare × 1

◆ F-312B Ultrasunete (numai în scopuri cosmetice)

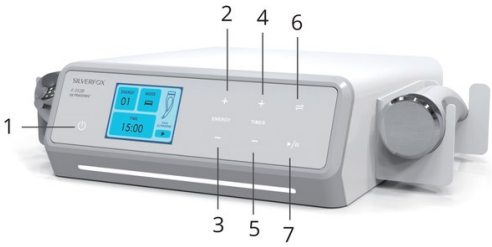

1. Întrerupător
2. Creșterea intensității +
3. Reducerea intensității –
4. Creșterea timpului +
5. Reducerea timpului –
6. Selector de mod
7. Start / Pauză

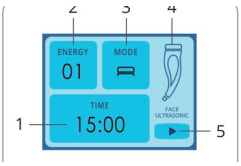

1. Timp
2. Nivel de intensitate
3. Modul sondei
4. Stare de funcționare
5. Stare de operare

Mod de utilizare

1. Introduceți sonda cu ultrasunete în conectorul corespunzător al aparatului. Când aparatul este conectat corect la cablul de alimentare, butonul „Power switch“ luminează roșu.
   Apăsând butonul „Power Switch“ intrați în modul de lucru, iar butonul apare alb pe ecran. Aparatul este setat implicit pe ieșirea sondei pentru zona ochilor; intensitatea de nivel 1 este setată pentru 15 minute.
2. În funcție de necesități puteți alege diferite moduri – apăsând butonul „Mode switch“ selectați modul de ieșire potrivit: ieșire pozitivă, ieșire negativă sau ieșire mixtă.
3. Cu butoanele „Time increase/decrease“ setați timpul de lucru între 1 și 30 de minute.
4. Apăsând butonul „Start“/„Pause“ porniți tratamentul. Nivelul de intensitate se poate regla de la 1 la 10.
5. Dacă doriți să opriți sonda cu ultrasunete în timpul tratamentului, apăsați butonul „Pause“.
6. La finalul tratamentului opriți aparatul cu butonul „power switch“; butonul se va aprinde roșu. După scoaterea ștecherului din priză, curățați sonda cu ultrasunete cu alcool 75% și depozitați-o într-un loc uscat.

Durata recomandată a aplicării

Adaptați timpul la grosimea pielii; de regulă tratamentul nu depășește 15 minute.

Atenție: Nu expuneți partea metalică a sondei la contactul cu apa

Atenționări privind utilizarea

⚠ Avertisment

- Nu îndreptați sonda direct spre globul ocular, nu atingeți ochiul și nu masați pleoapa superioară.
- Utilizarea este interzisă la următoarele categorii:
  ① femei însărcinate și persoane cu stimulator cardiac;
  ② clienți oncologici și persoane cu afecțiuni cardiace grave;
  ③ arsuri, opăriri, arsuri solare, inflamații sau alte leziuni ale pielii;
  ④ clienți alergici și persoane cu dermatită de contact.
- Este interzisă pornirea sondei fără aplicare cosmetică – există risc de opărire la temperatură ridicată, iar supraîncălzirea scurtează durata de viață a sondei.
- Nu dezasamblați singur sonda din inox și mânerul. Răsucirea sondei din inox și a mânerului poate deteriora sonda.
- Această funcție nu poate fi utilizată în alte scopuri decât cele cosmetice.


⚠ Atenție

- Înainte de tratament, aplicați pe zona tratată suficientă cremă sau ser, pentru ca între sondă și piele să existe un mediu bun și pielea să nu fie întinsă.
- În timpul lucrului, sonda trebuie să fie în contact cu pielea, pentru a evita cavitația și deteriorarea pielii.
- Sonda pornită nu trebuie să rămână fără contact cu pielea, pentru a nu se deteriora și pentru a nu i se scurta durata de viață.
- Dacă sonda este prea fierbinte, arde pielea, de aceea tratamentul nu trebuie să depășească 15 minute; în cazul pielii sensibile reduceți timpul și intensitatea. Prelungirea timpului nu sporește efectul și poate fi periculoasă. Staționarea într-un singur punct al pielii nu trebuie să depășească 5 secunde.
- După tratament poate apărea o înroșire de scurtă durată a pielii, cauzată de vibrațiile sondei și de căldura produsă, care intensifică circulația sangvină – este o stare normală.


Parametrii produsului

Model produs	F-312B
Alimentare	AC 100V–240V, 50/60Hz
Putere consumată	11W
Dimensiunile produsului	20.8×23×7.5 cm
Dimensiunile ambalajului	37×27.5×14 cm
Conținutul ambalajului	**Unitate principală × 1**
	Raft pentru accesorii × 2
	Sondă plană cu vârf din inox pentru ultrasunete × 1
	Sondă plană din inox pentru ultrasunete × 1
	Cablu de alimentare × 1

◆ F-313B Galvanic

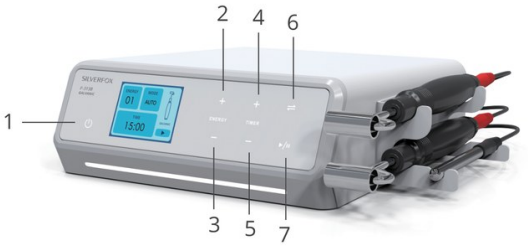

1. Întrerupător
2. Creșterea intensității +
3. Reducerea intensității –
4. Creșterea timpului +
5. Reducerea timpului –
6. Selector de mod
7. Start / Pauză

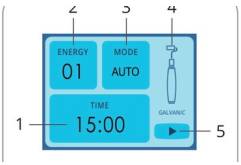

1. Timp
2. Nivel de intensitate
3. Selectarea modului
4. Stare de funcționare
5. Stare de operare

Mod de utilizare

1. Introduceți accesoriul galvanic în conectorul corespunzător al aparatului. Când aparatul este conectat corect la cablul de alimentare, butonul „Power switch“ luminează roșu. Apăsând butonul „Power Switch“ intrați în modul de lucru, iar butonul apare alb pe ecran. Aparatul este setat implicit pe ieșirea sondei pentru zona ochilor; intensitatea de nivel 1 este setată pentru 15 minute.
2. În funcție de necesități puteți alege diferite moduri – apăsând butonul „Mode switch“ selectați sonda potrivită pentru față sau pentru ochi.
3. Cu butoanele „Time increase/decrease“ setați timpul de lucru între 1 și 30 de minute.
4. Apăsând butonul „Start“/„Pause“ porniți tratamentul. Nivelul de intensitate se poate regla de la 1 la 10.
5. Dacă doriți să opriți sonda galvanică în timpul tratamentului, apăsați butonul „Pause“.
6. La finalul tratamentului opriți aparatul cu butonul „power switch“; butonul se va aprinde roșu. După scoaterea ștecherului din priză, curățați sonda galvanică cu alcool 75% și depozitați-o într-un loc uscat.

Durata recomandată a aplicării

1) Introducerea substanțelor active: 2 minute fază anionică, apoi 6 minute fază cationică.
2) Tratament de curățare: 6 minute fază anionică și 2 minute fază cationică.

Atenționări privind utilizarea

F-313B

⚠ Avertisment

- Nu lucrați cu rola direct pe globul ocular și nu atingeți ochiul cu aceasta.
- Produsul este interzis la următoarele persoane și zone:
  ① femei însărcinate și persoane cu materiale metalice în corp;
  ② clienți alergici și oncologici;
  ③ arsuri, opăriri, arsuri solare, inflamații sau alte leziuni ale pielii;
  ④ persoane cu capilare dilatate.
- Este interzisă introducerea soluțiilor puternic alcaline, pentru a evita deteriorarea chimică negativă.
- Această funcție nu poate fi utilizată în alte scopuri decât cele cosmetice.

⚠ Atenție

- Aciditatea și alcalinitatea produselor cosmetice trebuie să corespundă polului rolei. La polul pozitiv, substanța introdusă este acidă (+); la polul negativ, substanța introdusă este alcalină (−). Dacă produsul nu are indicat pH-ul, îl puteți verifica cu hârtie de turnesol.
- În timpul lucrului, nu atingeți rola direct de bagheta de mână. La un contact neatent, aparatul activează protecția automată și deconectează ieșirea.
- La clienții cu strat cornos mai gros, efectuați mai întâi un peeling, apoi aplicați uniform substanța pe zona tratată.
- Substanțele diferite (două sau mai multe substanțe chimice) nu pot fi introduse simultan sau succesiv în același loc, indiferent de sarcina lor.
- În condiții normale, efectul ionoforezei este invers proporțional cu masa moleculară a substanței introduse: cu cât masa moleculară este mai mare, cu atât introducerea este mai slabă, și cu cât masa moleculară este mai mică, cu atât introducerea este mai bună.

Parametrii produsului


Model produs	F-313B
Alimentare	AC 100V–240V, 50/60Hz
Putere consumată	4W
Dimensiunile produsului	20.8×23×7.5 cm
Dimensiunile ambalajului	37×27.5×14 cm
Conținutul ambalajului	**Unitate principală × 1**
	Raft pentru accesorii × 1
	Baghetă cu rolă × 2
	Baghetă de mână × 2
	Cablu de alimentare × 1

Aparat cosmetic

◆ F-314B Înaltă frecvență (numai în scopuri cosmetice)



1. Întrerupător
2. Creșterea intensității +
3. Reducerea intensității –
4. Creșterea timpului +
5. Reducerea timpului –
6. Start / Pauză

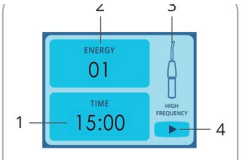

1. Timp
2. Nivel de intensitate
3. Stare de funcționare
4. Stare de operare

Mod de utilizare

1. Introduceți mânerul de înaltă frecvență în conectorul corespunzător al aparatului. Când aparatul este conectat corect la cablul de alimentare, butonul „Power switch“ luminează roșu. Apăsând butonul „Power Switch“ intrați în modul de lucru, iar butonul apare alb pe ecran. Aparatul este setat implicit pe ieșire cu undă continuă; intensitatea de nivel 1 este setată pentru 15 minute.
2. În funcție de necesități puteți alege dintre mai multe moduri – montați pe mânerul de electroterapie de înaltă frecvență electrodul potrivit.
3. Cu butoanele „Time increase/decrease“ setați timpul de lucru între 1 și 30 de minute.
4. Apăsând butonul „Start“/„Pause“ porniți tratamentul. Nivelul de intensitate se poate regla de la 1 la 10.
5. Dacă doriți să opriți sonda în timpul tratamentului, apăsați butonul „Pause“.
6. La finalul tratamentului opriți aparatul cu butonul „power switch“; butonul se va aprinde roșu. După scoaterea ștecherului din priză, curățați electrodul cu alcool 75% și depozitați-l într-un loc uscat.

Durata recomandată a aplicării

1) Ten gras: 10 – 15 minute
2) Ten uscat și deshidratat: 3 – 5 minute

Atenție: Nu expuneți partea metalică a electrodului la contactul cu apa


Atenționări privind utilizarea F-314B

⚠ Avertisment


- Când unitatea principală este pornită, este interzis să atingeți conectorul de ieșire al unității principale și conectorul de ieșire al mânerului de electroterapie de înaltă frecvență.
- Nu îndreptați electrodul direct spre ochi și nu atingeți cu el zona ochilor.
- Produsul este interzis la următoarele persoane și zone:
  ① femei însărcinate și persoane cu dispozitive implantate (de ex. stimulator cardiac);
  ② persoane cu boli vasculare și cu sensibilitate ridicată a pielii;
  ③ persoane cu implanturi metalice sau lucrări dentare metalice în corp;
  ④ persoane cu leziuni ale pielii și alte afecțiuni cutanate;
  ⑤ zone cu pilozitate abundentă.
- Nu utilizați produse de îngrijire care conțin alcool – alcoolul este puternic inflamabil. Dacă este necesar un tonic cu alcool, aplicați-l doar după utilizarea produsului.
- În timpul tratamentului, nu țineți cu mâna zona de îmbinare dintre mânerul de înaltă frecvență și electrod – există risc de electrocutare.
- Staționarea într-un singur punct al pielii nu trebuie să depășească 5 secunde.
- Această funcție nu poate fi utilizată în alte scopuri decât cele cosmetice.

⚠ Atenție

- Înainte de utilizare, verificați dacă electrodul sau capul metalic de pe acesta nu este slăbit și dacă electrodul nu este fisurat sau deteriorat. În acest caz, nu îl utilizați și înlocuiți-l imediat.
- Reduceți treptat intensitatea la zero, opriți aparatul de la întrerupător și scoateți ștecherul din priză înainte de a monta sau a scoate electrodul.
- La montarea și scoaterea electrodului, purtați mai întâi mănuși de cauciuc și țineți electrodul cu degetul mare și arătătorul: introduceți-l până la capătul orificiului, până când stă ferm, și nu apăsați pe el cu palma, pentru ca sticla să nu se spargă și să provoace rănirea. Este interzis să trageți brusc de electrod, pentru ca capul metalic să nu se rupă sau să nu se spargă și să provoace rănirea.

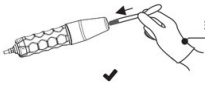

Purtați mănuși de cauciuc, țineți electrodul cu degetul mare și arătătorul și introduceți-l până la capăt.

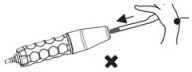


Purtați mănuși de cauciuc, nu apăsați electrodul cu palma.

- În timpul utilizării, ieșirea de înaltă tensiune din electrod produce interferențe.
- Este interzis să vă apropiați cu aparatul cosmetic de înaltă frecvență de unitatea principală și de alte aparate electrice. Interferențele pot provoca nefuncționarea sau deteriorarea unității principale.
- Când electrodul se află la mai puțin de 2,5 cm de piele, dar nu o atinge, iar scânteile irită pielea, reduceți imediat intensitatea. Dacă clientul simte în continuare scânteile, așezați-i pe față o bucată de prosop uscat din bumbac (nu sunt permise prosoapele din nailon sau din alte fibre sintetice).
- În timpul tratamentului, țineți electrodul permanent pe pielea clientului. La aplicarea indirectă de înaltă frecvență, la pornirea și oprirea aparatului o mână trebuie să fie permanent în contact cu pielea clientului; nu o îndepărtați niciodată. În caz contrar, ambele părți vor simți curentul, ceea ce este neplăcut.
- După utilizare, opriți mai întâi alimentarea, apoi scoateți ștecherul din priză și scoateți electrodul din mânerul de înaltă frecvență; sterilizați electrodul, lăsați-l să se usuce și depozitați-l în cutia pentru accesorii.


Parametrii produsului

Model produs	F-314B
Alimentare	AC 100V–120V sau AC 220V–240V, 50/60Hz
Putere consumată	15W
Dimensiunile produsului	20.8×23×7.5 cm
Dimensiunile ambalajului	37×27.5×14 cm
Conținutul ambalajului	**Unitate principală × 1**
	Raft pentru accesorii × 1
	Mâner de electroterapie de înaltă frecvență × 1
	Electrod tip lingură × 1
	Electrod punctiform × 1
	Electrod dreptunghiular × 1
	Electrod tip ciupercă × 1
	Cablu de alimentare × 1

◆ F-315B Perie rotativă

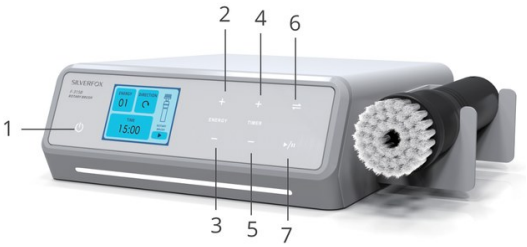

1. Întrerupător
2. Creșterea intensității +
3. Reducerea intensității –
4. Creșterea timpului +
5. Reducerea timpului –
6. Selector de mod
7. Start / Pauză

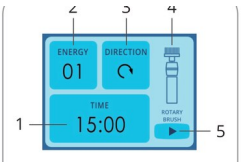

1. Timp
2. Nivel de intensitate
3. Sensul de rotație
4. Stare de funcționare
5. Stare de operare

Mod de utilizare

1. Introduceți peria rotativă în conectorul corespunzător al aparatului. Când aparatul este conectat corect la cablul de alimentare, butonul „Power switch“ luminează roșu. Apăsând butonul „Power Switch“ intrați în modul de lucru, iar butonul apare alb pe ecran. Aparatul este setat implicit pe modul de ieșire; intensitatea de nivel 1 este setată pentru 15 minute.
2. În funcție de necesități puteți alege dintre mai multe moduri – montați pe mânerul periei rotative capul abraziv potrivit.
3. Apăsând butonul selectorului de mod alegeți modul potrivit: rotație în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers.
4. Cu butoanele „Time increase/decrease“ setați timpul de lucru între 1 și 30 de minute.
5. Apăsând butonul „Start“/„Pause“ porniți tratamentul. Nivelul de intensitate se poate regla de la 1 la 10.
6. Dacă doriți să opriți aparatul în timpul tratamentului, apăsați butonul „Pause“.
7. La finalul tratamentului opriți aparatul cu butonul „power switch“; butonul se va aprinde roșu. După scoaterea ștecherului din priză, curățați mânerul periei rotative și capul abraziv cu alcool 75% și depozitați-le într-un loc uscat.

Durata recomandată a aplicării

Adaptați timpul la starea pielii; de regulă tratamentul nu depășește 10 minute.

Atenționări privind utilizarea

F-315B

⚠ Avertisment

- Nu utilizați în zona de sub ochi.
- Funcția de periere este interzisă la următoarele categorii:
  ① clienți alergici;
  ② arsuri, opăriri, arsuri solare, inflamații sau alte leziuni ale pielii.

⚠ Atenție

- Înainte de utilizare, verificați dacă capul periei este fixat ferm pe mâner.
- Nu utilizați peria ținând de capul periei.
- Nu montați și nu schimbați capul periei în timpul utilizării.
- Nu frânați rotația periei cu mâinile sau cu alte obiecte.
- Nu utilizați funcția de periere timp îndelungat, pentru ca mânerul periei să nu se supraîncălzească.
- Înainte de contactul cu pielea clientului, întoarceți capul periei în jos. La contactul cu pielea clientului apăsați ușor, pentru ca acestuia să nu îi fie neplăcut.


Parametrii produsului

Model produs	F-315B
Alimentare	AC 100V–240V, 50/60Hz
Putere consumată	25W
Dimensiunile produsului	20.8×23×7.5 cm
Dimensiunile ambalajului	37×27.5×14 cm
Conținutul ambalajului	**Unitate principală × 1**
	Raft pentru accesorii × 1
	Perie mică × 1
	Perie mare × 1
	Cap abraziv mic din gresie × 1
	Cap abraziv mare din gresie × 1
	Cablu de alimentare × 1

◆ F-316B Vacuum şi spray



1. Întrerupător
2. Creşterea intensităţii +
3. Reducerea intensităţii –
4. Creşterea timpului +
5. Reducerea timpului –
6. Selector de mod
7. Start / Pauză

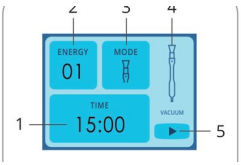

1. Timp
2. Nivel de intensitate
3. Selectarea modului
4. Stare de funcţionare
5. Stare de operare

Mod de utilizare

1. Introduceţi furtunul de aer în conectorul pentru furtun de aer al unităţii principale. Când aparatul este conectat corect la cablul de alimentare, butonul „Power switch“ luminează roşu. Apăsând butonul „Power Switch“ intraţi în modul de lucru, iar butonul apare alb pe ecran. Aparatul este setat implicit pe modul de ieşire; intensitatea de nivel 1 este setată pentru 15 minute.
2. Apăsând butonul selectorului de mod alegeţi modul potrivit: aspirare (Suction) sau hidratare (Hydration). Dacă alegeţi modul de aspirare, trebuie să montaţi o pipetă de sticlă potrivită.
3. Cu butoanele „Time increase/decrease“ setaţi timpul de lucru între 1 şi 30 de minute.
4. Apăsând butonul „Start“/„Pause“ porniţi tratamentul. Nivelul de intensitate se poate regla de la 1 la 10.
5. Dacă doriţi să opriţi aparatul în timpul tratamentului, apăsaţi butonul „Pause“.
6. La finalul tratamentului opriţi aparatul cu butonul „power switch“; butonul se va aprinde roşu. După scoaterea ştecherului din priză, curăţaţi dispozitivul de hidratare, creionul de aspirare şi pipeta de sticlă cu alcool 75% şi depozitaţi-le într-un loc uscat.

Durata recomandată a aplicării

Aspirarea şi hidratarea: maximum 10 minute

Atenționări privind utilizarea

F-316B

⚠ Avertisment

- Nu utilizați funcția de aspirare pe ochi și în jurul acestora.
- Funcțiile de aspirare și spray sunt interzise la următoarele persoane:
  ① clienți alergici;
  ② arsuri, opăriri, arsuri solare, inflamații sau alte leziuni ale pielii.


⚠ Atenție

- Dacă după pornirea aparatului nu se simte aspirarea, este un fenomen normal. Așteptați puțin și aspirarea se va restabili.
- Dacă pulverizarea dispozitivului de hidratare nu este suficientă, reglați-o din rozeta de la capătul dispozitivului.
- Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă pipeta de sticlă nu este fisurată sau spartă. În acest caz, nu o utilizați și înlocuiți-o imediat.
- Nu staționați prea mult cu pipeta de sticlă într-un singur loc. Mișcați rapid creionul de aspirare, pentru a nu răni pielea.
- Aveți grijă să nu introduceți duza în conectorul de aspirare – produsul cosmetic ar fi aspirat în pompa de aer și ar deteriora unitatea principală.
- Nu trageți brusc de furtunul de aer, pentru a nu-l deteriora.
- După utilizare, aparatul trebuie deconectat de la alimentare.


Parametrii produsului

Model produs	F-316B
Alimentare	AC 100V–240V, 50/60Hz
Putere consumată	65W
Dimensiunile produsului	20.8×23×7.5 cm
Dimensiunile ambalajului	37×27.5×14 cm
Conținutul ambalajului	**Unitate principală × 1**
	Raft pentru accesorii × 1
	Mâner pentru creionul de aspirare × 1
	Pipetă de sticlă cu capăt plat × 1
	Pipetă de sticlă cu capăt rotund × 1
	Pipetă de sticlă cu capăt ascuțit × 1
	Accesorii pentru aparat × 1
	Cablu de alimentare × 1

◆ F-317B Radiofrecvenţă (numai în scopuri cosmetice)

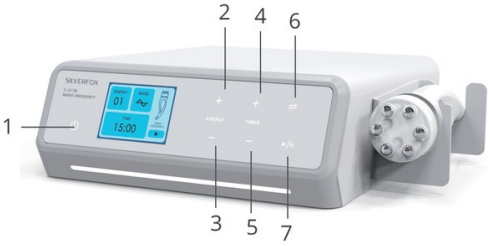

1. Întrerupător
2. Creşterea intensităţii +
3. Reducerea intensităţii –
4. Creşterea timpului +
5. Reducerea timpului –
6. Selector de mod
7. Start / Pauză

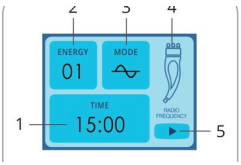

1. Timp
2. Nivel de intensitate
3. Modul sondei
4. Stare de funcţionare
5. Stare de operare

Mod de utilizare

1. Introduceţi sonda RF (de radiofrecvenţă) în conectorul unităţii principale. Când aparatul este conectat corect la cablul de alimentare, butonul „Power switch“ luminează roşu. Apăsând butonul „Power Switch“ intraţi în modul de lucru, iar butonul apare alb pe ecran. Aparatul este setat implicit pe ieşire cu undă continuă; intensitatea de nivel 1 este setată pentru 15 minute.
2. Apăsând butonul selectorului de mod alegeţi modul potrivit necesităţilor dumneavoastră.
3. Cu butoanele „Time increase/decrease“ setaţi timpul de lucru între 1 şi 30 de minute.
4. Apăsând butonul „Start“/„Pause“ porniţi tratamentul cu sonda RF. Nivelul de intensitate se poate regla de la 1 la 10 cu butoanele „Energy increase/decrease“.
5. Dacă doriţi să opriţi aparatul în timpul tratamentului, apăsaţi butonul „Pause“.
6. La finalul tratamentului opriţi aparatul cu butonul „power switch“; butonul se va aprinde roşu. După scoaterea ştecherului din priză, curăţaţi sonda RF cu alcool 75% şi depozitaţi-o într-un loc uscat.

Atenționări privind utilizarea

F-317B

⚠ Avertisment

- Utilizați produsul la tensiunea nominală corespunzătoare și asigurați-vă că ștecherul este complet introdus, în caz contrar există risc de electrocutare sau de incendiu.
- Nu utilizați în baie sau într-o încăpere umedă – există risc de electrocutare sau de incendiu.
- Nu utilizați în medii cu vopsele, lacuri, oxigen și alte substanțe inflamabile și explozive.
- Dacă nu utilizați funcția, apăsați butonul de pauză.
- Această funcție nu se utilizează la persoane cu boli cardiace, diabet, hipertiroidism, tumori maligne, hipertensiune severă, implant metalic sau stimulator cardiac, epilepsie și afecțiuni ale pielii, inclusiv cancer de piele. Dacă produsul este utilizat de persoane cu dizabilități fizice, senzoriale sau mentale ori de persoane fără experiență și cunoștințe (inclusiv copii), acestea trebuie supravegheate de o persoană responsabilă, care răspunde de siguranța lor. Nu permiteți copiilor să manipuleze produsul și să se joace cu el.
- Produsul nu trebuie utilizat de femei însărcinate, de femei care alăptează și de femei aflate la menstruație.
- Nu utilizați pe zonele rănite și pe articulații, pentru a nu perturba vindecarea rănilor.
- Această funcție nu poate fi utilizată în alte scopuri decât cele cosmetice.

⚠ Atenție

- Se recomandă ca staționarea într-un singur punct al pielii să nu depășească 5 secunde, pentru a evita arsurile.
- În timpul tratamentului, evitați cu sonda globul ocular și glanda tiroidă.
- După tratament, dezinfectați sonda cu alcool 75%, lăsați-o să se usuce bine și depozitați-o.
- Această funcție nu este recomandată în zonele în care au fost aplicate materiale de umplutură artificiale, de exemplu gel siliconic.
- Înainte de utilizarea acestei funcții se recomandă îndepărtarea tuturor accesoriilor metalice.


Parametrii produsului

Model produs	F-317B
Alimentare	AC 100V–240V, 50/60Hz
Putere consumată	60W
Dimensiunile produsului	20.8×23×7.5 cm
Dimensiunile ambalajului	37×27.5×14 cm
Conținutul ambalajului	**Unitate principală × 1**
	Raft pentru accesorii × 1
	Accesorii pentru sonda RF (de radiofrecvență) × 1
	Cablu de alimentare × 1

◆ F-318B Ciocan rece şi cald



1. Întrerupător
2. Creşterea intensităţii +
3. Reducerea intensităţii –
4. Creşterea timpului +
5. Reducerea timpului –
6. Selector de mod
7. Start / Pauză

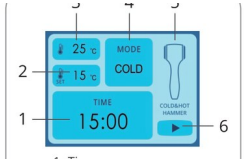

1. Timp
2. Temperatura setată
3. Temperatura actuală
4. Modul sondei
5. Starea de funcţionare a sondei
6. Stare de operare

Mod de utilizare

1. Introduceţi ciocanul rece şi cald în conectorul unităţii principale. Când aparatul este conectat corect la cablul de alimentare, butonul „Power switch“ luminează roşu. Apăsând butonul „Power Switch“ intraţi în modul de lucru, iar butonul apare alb pe ecran. Aparatul este setat implicit pe încălzire. Setarea implicită este de 35 °C stabil timp de 15 minute.
2. Apăsând butonul selectorului de mod alegeţi modul potrivit necesităţilor dumneavoastră.
3. Cu butoanele „Time increase/decrease“ setaţi timpul de lucru între 1 şi 30 de minute.
4. Apăsând butonul „Start“/„Pause“ porniţi tratamentul cu ciocanul rece şi cald. Nivelul de intensitate se poate regla de la 1 la 10 cu butoanele „Energy increase/decrease“.
5. Dacă doriţi să opriţi ciocanul rece şi cald în timpul tratamentului, apăsaţi butonul „Pause“.
6. La finalul tratamentului opriţi aparatul cu butonul „power switch“; butonul se va aprinde roşu. După scoaterea ştecherului din priză, curăţaţi ciocanul rece şi cald cu alcool 75% şi depozitaţi-l într-un loc uscat.

Durata recomandată a aplicării

Adaptaţi timpul la zona tratată şi la starea pielii;
de regulă tratamentul durează 10 – 15 minute.

Atenționări privind utilizarea

⚠ Avertisment

- Această funcție este interzisă la următoarele persoane și zone:
  ① clienți cu erupții recurente pe cicatrice și clienți alergici;
  ② arsuri, opăriri, arsuri solare, inflamații sau alte leziuni ale pielii;
  ③ persoane cu boli imunosupresive care determină imunitate scăzută sau persoane care iau imunosupresoare;
  ④ plăgi chirurgicale din ultimele 3 luni.
- Cosmeticiana nu trebuie să plece cât timp ciocanul funcționează, pentru a evita accidentele.

⚠ Atenție

- Ciocanul rece și cald se poate utiliza numai în interior, fiind recomandată o temperatură de aproximativ 25 °C. Funcționarea sa este influențată de temperatura ambiantă – la temperaturi prea ridicate sau prea scăzute este posibil să nu atingă temperatura de lucru necesară și efectul așteptat.
- După fiecare pornire a aparatului cosmetic și după comutarea funcției de rece și cald, așteptați puțin până când ciocanul atinge temperatura setată. În condiții normale, încălzirea după pornire durează aproximativ 5 minute; la comutarea între cald și rece, temperatura se modifică în aproximativ 3 minute.
- În timpul utilizării, nu acoperiți fanta de aer din jurul ciocanului, pentru ca în interior să nu condenseze apă și să nu apară un scurtcircuit.
- În timpul tratamentului, aplicați ciocanul strâns pe piele; la tratarea frunții și a osului frontal apăsați ușor.
- Când temperatura ciocanului este ridicată, nu staționați într-un singur punct al pielii.
- Nu utilizați ciocanul rece și cald ca instrument de percuție.
- Dacă la ambele capete ale capului ciocanului există zgârieturi, înlocuiți accesoriul cu unul nou înainte de utilizare.
- Nu trageți excesiv de cablul spiralat al ciocanului, respectați raza sa de mișcare.


Parametrii produsului

Model produs	F-318B
Alimentare	AC 100V–240V, 50/60Hz
Putere consumată	35W
Dimensiunile produsului	20.8×23×7.5 cm
Dimensiunile ambalajului	37×27.5×14 cm
Conținutul ambalajului	**Unitate principală × 1**
	Raft pentru accesorii × 1
	Accesorii pentru ciocanul rece și cald × 1
	Cablu de alimentare × 1

◆ F-319B Dermabraziune cu diamant



1. Întrerupător
2. Creșterea intensității +
3. Reducerea intensității −
4. Creșterea timpului +
5. Reducerea timpului −
6. Start / Pauză

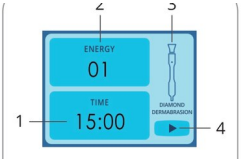

1. Timp
2. Nivel de intensitate
3. Stare de funcționare
4. Stare de operare

Mod de utilizare

1. Introduceți creionul sau bagheta de aspirare în conectorul unității principale. Când aparatul este conectat corect la cablul de alimentare, butonul „Power switch“ luminează roșu. Apăsând butonul „Power Switch“ intrați în modul de lucru, iar butonul apare alb pe ecran. Aparatul este setat implicit pe nivelul 1 timp de 15 minute.
2. Alegeți capul abraziv microcristalin potrivit zonei tratate și efectului dorit.
3. Cu butoanele „Time increase/decrease“ setați timpul de lucru între 1 și 30 de minute.
4. Apăsând butonul „Start“/„Pause“ porniți tratamentul cu bagheta de aspirare. Nivelul de intensitate se poate regla de la 1 la 10 cu butoanele „Energy increase/decrease“.
5. Dacă doriți să opriți bagheta de aspirare în timpul tratamentului, apăsați butonul „Pause“.
6. La finalul tratamentului opriți aparatul cu butonul „power switch“; butonul se va aprinde roșu. După scoaterea ștecherului din priză, curățați bagheta de aspirare și capul abraziv microcristalin cu alcool 75% și depozitați-le într-un loc uscat.

Atenționări privind utilizarea

F-319B

⚠ Avertisment

- Această funcție nu este indicată persoanelor cu hipertensiune arterială, boli cardiace și diabet.
- Produsul nu trebuie utilizat de femei însărcinate, de femei care alăptează și de femei aflate la menstruație.
- Utilizarea este interzisă persoanelor cu boli infecțioase și afecțiuni oncologice.
- Este interzisă utilizarea la persoanele care în ultimul an au efectuat injectări cu toxină botulinică.
- Persoanele cu țesut cicatricial și deficit de colagen nu trebuie să utilizeze această funcție, în caz contrar se produc leziuni permanente ale pielii.
- Această funcție nu poate fi utilizată în alte scopuri decât cele cosmetice.
- Nu permiteți copiilor să ajungă la produs și să se joace cu el – există pericol.

⚠ Atenție

- Înainte de tratament, evaluați starea pielii clientului și alegeți capul abraziv potrivit și o aspirare adecvată.
- După fiecare utilizare, filtrul din bagheta de aspirare trebuie curățat sau înlocuit.
- După tratament, spălați fața cu apă.
- După tratament, dezinfectați capul abraziv cu alcool 75% și depozitați-l într-un loc uscat și potrivit.

Parametrii produsului

Model produs	F-319B
Alimentare	AC 100V–240V, 50/60Hz
Putere consumată	30W
Dimensiunile produsului	20.8×23×7.5 cm
Dimensiunile ambalajului	37×27.5×14 cm
Conținutul ambalajului	**Unitate principală × 1**
	Raft pentru accesorii × 1
	Accesorii pentru microșlefuire (inclusiv 9 tipuri de capete de microșlefuire) **× 1**
	Cablu de alimentare × 1

Remedierea problemelor

Defecțiune	Cauză	Soluție
Unitatea principală nu funcționează sau se blochează.	1. Lipsă alimentare.	1. Verificați dacă siguranța din suportul de siguranțe al modulului de alimentare nu este arsă. Dacă este arsă, înlocuiți-o cu una cu aceiași parametri. 2. Apăsați butonul de start; după pornire acesta se va aprinde.
	2. Cablul de alimentare nu este introdus sau conectat corect.	2. Introduceți sau conectați corect cablul de alimentare.
Afișajul nu funcționează.	1. Lipsă alimentare.	1. Porniți alimentarea.
Sonda accesoriului nu funcționează.	1. Contact slab la conector.	1. Deconectați cablul de ieșire și introduceți-l din nou în conector.
Putere slabă la ciocanul rece și cald, ultrasunete, spatulă, RF, galvanic și alte accesorii.	1. Treapta nu este setată corect; 2. Temperatura ridicată a accesoriului reduce puterea de ieșire.	1. Setați o treaptă mai mare; 2. Utilizați moderat, nu lăsați pornit timp îndelungat. Când nu utilizați accesoriul, opriți alimentarea.
Dermabraziunea are aspirare slabă.	1. Treapta nu este setată corect; 2. Dermabraziunea este înfundată în interior; 3. Furtun de aer uzat; 4. Îmbinarea dintre furtunul de aer și creionul de aspirare este slăbită.	1. Setați treapta și reglați supapa de reglare a aerului; 2. Înlocuiți accesoriile dermabraziunii; 3. Înlocuiți furtunul de aer cu unul nou și introduceți-l în conector.
Pulverizatorul pulverizează slab.	1. Treapta nu este setată corect; 2. Dispozitivul de hidratare este înfundat în interior; 3. Furtun de aer uzat; 4. Îmbinarea dintre furtunul de aer și dispozitivul de hidratare este slăbită; 5. Este puțină apă în recipient.	1. Setați o treaptă mai mare; 2. Înlocuiți accesoriile dispozitivului de hidratare; 3. Înlocuiți furtunul de aer cu unul nou și introduceți-l în conector; 4. Urmăriți cantitatea de apă din recipient și completați la timp.
Creionul de aspirare aspiră slab.	1. Treapta nu este setată corect; 2. Tubul de aspirare al creionului este înfundat în interior; 3. Furtun de aer uzat; 4. Îmbinarea dintre furtunul de aer și creionul de aspirare este slăbită.	1. Setați o treaptă mai mare; 2. Înlocuiți capul creionului de aspirare; 3. Înlocuiți furtunul de aer cu unul nou și introduceți-l în conector.
Putere slabă a electroterapiei de înaltă frecvență.	1. Treapta nu este setată corect; 2. Uzură după utilizarea îndelungată a electrodului.	1. Setați o treaptă mai mare; 2. Înlocuiți accesoriul de electroterapie.
Unitatea principală vibrează.	1. Accesoriu înfundat.	1. Verificați dacă furtunul de aer al accesoriului nu este înfundat.

Dacă problema nu se rezolvă nici după pașii de mai sus, adresați-vă centrului de service sau furnizorului.

Fabulo

Importator: iM3 s.r.o.
Malotejedská 515/8, 929 01 Dunajská Streda
Slovacia
www.fabulo.ro



Nu eliminați aparatele vechi sau defecte împreună cu deșeurile menajere; predați-le la punctele publice de colectare.

▲ Înainte de utilizare, verificați specificația produsului. Acest manual are doar caracter informativ. Specificațiile se pot modifica fără notificare.